

ゴア® TAG® 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム
Zone 1 大動脈瘤、外傷性大動脈損傷 ケースプランニングフォーム



患者の機微情報－法令により保護される情報の開示は行わないでください。
以下に記入された情報は、手技に適したデバイスやバックアップデバイスの準備のために使用されます。


患者 ID :

CTA撮像日:

施設名:

実施医名:

位置		計測値
大動脈の計測		
A	左総頸動脈分岐部遠位端から2 cm中枢側の大動脈径	mm
B	左総頸動脈分岐部遠位端から1 cm中枢側の大動脈径	mm
C	左総頸動脈分岐部遠位端の大動脈径	mm
D	大動脈瘤の最大直径	mm
E	末梢留置位置から2 cm中枢側の大動脈径	mm
F	末梢留置位置から1 cm中枢側の大動脈径	mm
G	末梢側留置位置の大動脈径	mm
左総頸動脈の計測		
H	左総頸動脈起始部から最初の主要分枝までの長さ	cm
I	左総頸動脈起始部の血管径	mm
J	左総頸動脈起始部から1 cm末梢側の血管径	mm
K	左総頸動脈起始部から2 cm末梢側の血管径	mm
L	左総頸動脈起始部から3 cm末梢側の血管径	mm
大動脈長の計測		
M	中枢セグメント長:左総頸動脈分岐部遠位端から腕頭動脈入口部の半分までの長さ	cm
N	中枢カバード長:左総頸動脈分岐部遠位端から腕頭動脈入口部までの長さ	cm
O	左総頸動脈分岐部遠位端から大動脈瘤までの長さ	cm
P	大動脈瘤の長さ	cm
Q	大動脈瘤から腹腔動脈までの長さ	cm
R	総治療長	cm
角度の計測		
中枢側大動脈角度		°
左総頸動脈の分岐角度		°
左総頸動脈を基準としたときの腕頭動脈との角度		°
		前(腹側) / 後(背側)

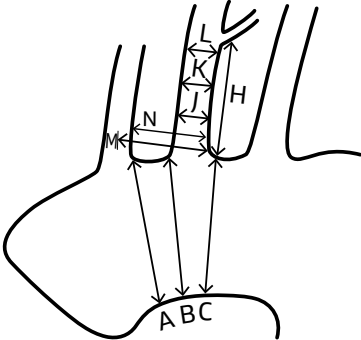

アクセス血管の計測		推奨するCアームの角度	
右総腸骨動脈径	mm	中枢側	LAO RAO
左総腸骨動脈径	mm	腕頭動脈分岐部	LAO RAO
右外腸骨動脈径 / 大腿動脈径	mm		Cranial Caudal
左外腸骨動脈径 / 大腿動脈径	mm	末梢側	LAO RAO
ケースプランニング 確認事項			
中枢側ランディングゾーンに顕著な石灰化 / 血栓はありますか			☐ はい ☐ いいえ
末梢側ランディングゾーンに顕著な石灰化 / 血栓はありますか			☐ はい ☐ いいえ
Notes			

適応するデバイス導入部位	☐ 右側	☐ 左側	☐ 腎動脈下大動脈	☐ 腸骨動脈	☐ 大腿動脈	☐ コンデュイットの使用
--------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

治療オプション1

留置するデバイス（中樞から末梢）	留置の順番（1,2など）

治療オプション2

留置するデバイス（中樞から末梢）	留置の順番（1,2など）

アオルティックコンポーネント（8 mmポータル）

アオルティックコンポーネント規格									
デバイス径（mm）	適応となる大動脈径（mm）	インターナルポータル径（mm）	中樞セグメント長（mm）	中樞カバード長（mm）	パーシャルアンカバーステント長（mm）	デバイス全長（cm）	ゴア®ドライシールフレックスイントロデューサシースのサイズ（Fr）	品番	数量
21	16–19.5	8	20	17	3	10	20	TAC082110J	
26	19.5–24	8	20	16	4	10	20	TAC082610J	
28	22–26	8	20	16	4	15	22	TAC082815J	
31	24–29	8	20	16	4	15	22	TAC083115J	
31	24–29	8	20	16	4	20	22	TAC083120J	
34	27–32	8	20	15	5	15	24	TAC083415J	
34	27–32	8	20	15	5	20	24	TAC083420J	
37	29–34	8	25	20	5	15	24	TAC083715J	
37	29–34	8	25	20	5	20	24	TAC083720J	
40	31–37	8	25	19	6	15	26	TAC084015J	
40	31–37	8	25	19	6	20	26	TAC084020J	
45	34–42	8	25	18.5	6.5	15	26	TAC084515J	
45	34–42	8	25	18.5	6.5	20	26	TAC084520J	

アオルティックコンポーネント（12 mmポータル）

アオルティックコンポーネント規格									
デバイス径（mm）	適応となる大動脈径（mm）	インターナルポータル径（mm）	中樞セグメント長（mm）	中樞カバード長（mm）	パーシャルアンカバーステント長（mm）	デバイス全長（cm）	ゴア®ドライシールフレックスイントロデューサシースのサイズ（Fr）	品番	数量
31	24–29	12	40	36	4	15	22	TAC123115J	
31	24–29	12	40	36	4	20	22	TAC123120J	
34	27–32	12	40	35	5	15	24	TAC123415J	
34	27–32	12	40	35	5	20	24	TAC123420J	
37	29–34	12	40	35	5	15	24	TAC123715J	
37	29–34	12	40	35	5	20	24	TAC123720J	
40	31–37	12	40	34	6	15	26	TAC124015J	
40	31–37	12	40	34	6	20	26	TAC124020J	
45	34–42	12	40	33.5	6.5	15	26	TAC124515J	
45	34–42	12	40	33.5	6.5	20	26	TAC124520J	

サイドブランチコンポーネント

デバイス径（mm）	適応となる分枝血管径（mm）	ポータルセグメント径（mm）	デバイス全長（cm）	適応となる分枝血管長（cm）	ゴア®ドライシールフレックスイントロデューサシースのサイズ（Fr）	品番	数量
8	6–7.5	8	6	3	14	TSB080806J	
10	7.5–9	8	6	3	14	TSB081006J	
12	9–11	8	6	3	14	TSB081206J	
15	11–13	8	6	3	14	TSB081506J	
17	13–15	8	6	3	14	TSB081706J	
15	11–13	12	6	2.5	14	TSB121506J	
17	13–15	12	6	2.5	14	TSB121706J	
20	15–18	12	6	2.5	14	TSB122006J	

アオルティックエクステンダー

デバイス径（mm）	適応となる大動脈径（mm）	デバイス全長（cm）	パーシャルアンカバーステント長（mm）	ゴア®ドライシールフレックスイントロデューサシースのサイズ（Fr）	品番	数量
21	16–19.5	3.6	3	20	TE2136J	
26	19.5–24	3.8	4	20	TE2638J	
28	22–26	4	4	22	TE2840J	
31	24–29	4	4	22	TE3140J	
34	27–32	4.2	5	24	TE3442J	
37	29–34	4.2	5	24	TE3742J	
40	31–37	4.3	6	26	TE4043J	
45	34–42	4.6	6.5	26	TE4546J	

ゴア® TAG コンフォーマブル 胸部大動脈ステントグラフト アクティブコントロールシステム^a

デバイス規格 (mm × cm)	数量	品番	デバイス規格 (mm × cm)	数量	品番	デバイス規格 (mm × cm)	数量	品番
21 × 10		TGM212110J	21 × 15		TGM212115J ^b			
26 × 21 × 10 テーパー		TGM262110J						
26 × 10		TGM262610J	26 × 15		TGM262615J	26 × 20		TGM262620J
31 × 26 × 10 テーパー		TGMR312610J						
28 × 10		TGM282810J	28 × 15		TGM282815J	28 × 20		TGM282820J
31 × 10		TGMR313110J	31 × 15		TGMR313115J	31 × 20		TGMR313120J
			34 × 28 × 15 テーパー		TGM342815J			
34 × 10		TGM343410J	34 × 15		TGM343415J	34 × 20		TGM343420J
			37 × 31 × 15 テーパー		TGMR373115J			
37 × 10		TGMR373710J	37 × 15		TGMR373715J	37 × 20		TGMR373720J
			40 × 34 × 15 テーパー		TGMR403415J			
40 × 10		TGMR404010J	40 × 15		TGMR404015J	40 × 20		TGMR404020J
			45 × 37 × 15 テーパー		TGM453715J			
45 × 10		TGM454510J	45 × 15		TGM454515J	45 × 20		TGM454520J

ゴア® トリローブ バルーンカテーテル II

規格	品番	数量
対象血管径 16–32 mm	BCM1634J	
対象血管径 26–42 mm	BCL2645J	

ゴア® ドライシール フレックス イントロデュサシース

シースサイズ (Fr)	シース外径 (mm)	シース作業長 (cm)	品番	数量
20	7.5	33	DSF2033	
20	7.5	65	DSF2065	
22	8.2	33	DSF2233	
22	8.2	65	DSF2265	
24	8.8	33	DSF2433	
24	8.8	65	DSF2465	
26	9.5	33	DSF2633	
26	9.5	65	DSF2665	

- a. 対象となる大動脈径はゴア® TAG® 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステムのアオルティックコンポーネントと同じです。
- b. 特注品番：詳しくは弊社営業担当者へお問い合わせください。

「添文ナビ」アプリで電子添文をご参照ください



販売名：ゴア® TAG® 胸部大動脈ブランチ型ステントグラフトシステム

承認番号：30600BZX00248000

一般的名称：大動脈用ステントグラフト



販売名：ゴア®ドライシール フレックス イントロデュサシース

承認番号：22800BZX00461000

一般的名称：心臓用カテーテルイントロデュサキット



販売名：ゴア®CTAG 胸部大動脈ステントグラフトシステム

承認番号：22500BZX00427000

一般的名称：大動脈用ステントグラフト



販売名：ゴア®トリローブバルーンカテーテル II

承認番号：22200BZX00729000

一般的名称：中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル

本資料は医療関係者向けです。それ以外の方への再配布はご遠慮ください。全ての禁忌、警告、使用上の注意および有害事象に関する詳細は電子化された添付文書（電子添文）を必ずご参照ください。

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 無断転載・複製を禁じます。記載の商標は、Goreグループの関連会社または各権利者の商標です。

“Together, improving life”および記載のデザイン（ロゴ）は、Goreの商標です。 26AR3021-JA01 JUNE 2026 MAT-0471-1

