
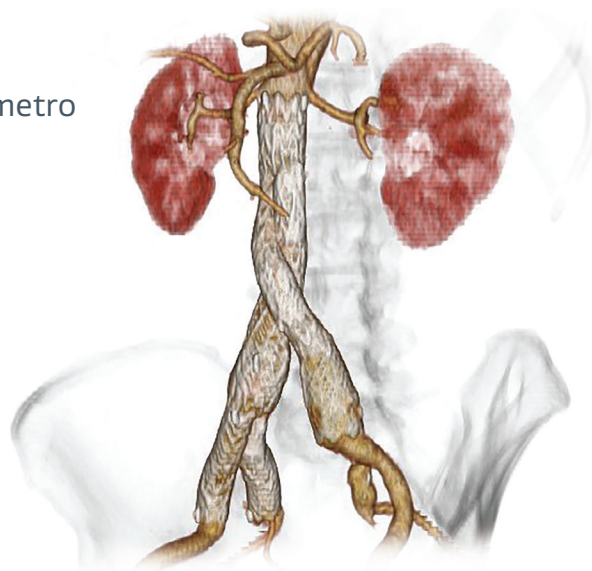


A PRESERVAÇÃO É IMPORTANTE — A.L.W.A.Y.S. (SEMPRE)

A preservação da artéria hipogástrica é o tratamento indicado^{1,2} para manter a qualidade de vida. Para determinar o melhor método de preservação, o critério **A. L. W. A. Y. S.**^{3,4} considera em cada paciente:

- A** *Activity level* – Nível de atividade
Nível físico/social
- L** *Length* - Comprimento
Zona de implantação distal < 20 mm
- W** *Width* - Largura
Aneurisma da íliaca comum > 20 mm de diâmetro
- A** *Aortic disease* - Doença aórtica
Extensão da doença aórtica do paciente
- Y** *Young* - Jovem
Expectativa de longevidade do paciente
- S** *Selagem*
Zona de selagem adequada

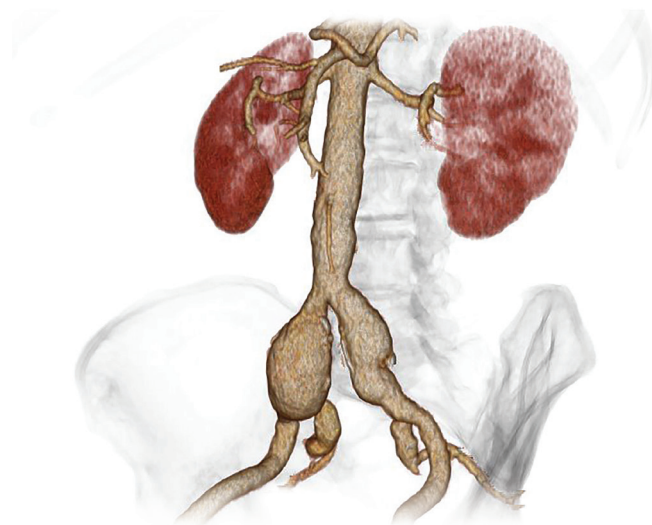

Os funcionários ou representantes autorizados da Gore não exercem a medicina. Os profissionais da saúde continuam sendo os responsáveis por tomar decisões sobre o atendimento dos pacientes e o uso de tecnologias médicas.

Pré-tratamento e acompanhamento de 5 anos; primeiro uso clínico. Imagens cortesia de Brian Peterson, MD. St. Anthony's Medical Center; St. Louis, Missouri.

Resultados duradouros. Desempenho comprovado.

O GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis (IBE) é a primeira solução comercial para ramos aórticos a ser aprovada pelo FDA. Ela foi desenvolvida especialmente para preservar o fluxo sanguíneo para as artérias ilíacas externa e interna.

Dados da IBE no Registro Global para Tratamento Endovascular da Aorta (GREAT) após quatro anos de acompanhamento:

63 pacientes	96,8%	98,4%	94,8%	Nenhum relatado
	Patência ^a Artéria Ilíaca externa	Patência ^a Artéria Ilíaca interna	Sem reintervenção relacionada à IBE ^b	Claudicação glútea e disfunção sexual



GORE® EXCLUDER®
Iliac Branch Endoprosthesis

O dispositivo GORE® EXCLUDER® AAA é a endoprótese EVAR mais estudada^c e foi desenvolvido para obter resultados duradouros.

Dados do dispositivo GORE® EXCLUDER® AAA do estudo GREAT durante^d 5 anos de acompanhamento:

3.274 pacientes	0,7%	0,7%
	Endoleaks tipo Ib	Oclusão de ramo ^a



GORE® EXCLUDER®
AAA Endoprosthesis

a. Com base nos eventos adversos de oclusão relatados.

b. Com base nos dados da IBE do GREAT durante quatro anos de acompanhamento, com n = 96.

c. Com base em ensaios clínicos e registros patrocinados pelo fabricante, publicados no Web site clinicaltrials.gov, para endopróteses atualmente disponíveis.

d. GREAT. n = 3.274. Para calcular os índices globais de eventos do procedimento até o final do período de estudo, foram incluídos todos os participantes que poderiam ter apresentado eventos, independentemente da duração do acompanhamento. Para dados sobre desfechos, o GREAT apenas coleta eventos adversos graves relatados pelos centros. Portanto, todos os endoleaks relatados são definidos como graves e requerem reintervenção.

Referências

1. Chaikof EL, Dalman RL, Eskandari MK, et al. The Society for Vascular Surgery practice guidelines on the care of patients with an abdominal aortic aneurysm. *Journal of Vascular Surgery* 2018;67(1):2-77.e2.
2. Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, et al. Management of abdominal aortic aneurysms clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery. *European Journal of Vascular & Endovascular Surgery* 2011;41(Suplemento 1):S1-S58.
3. Million A, Milner R, Oderich GS, Schneider DB, Spark I, Verzini F. Expert discussion: when to preserve the hypogastric artery. *Endovascular Today* 2017;16(8) Suplementos:6-11.
4. Schneider DB, Milner R, Heyligers JMM, Chakfé N, Matsumura J. Outcomes of the GORE Iliac Branch Endoprosthesis in clinical trial and real-world registry settings. *Journal of Vascular Surgery* 2019;69(2):367-377.e1.

 Consulte as Instruções de Uso eifu.goremedical.com

Consulte nas *Instruções de Uso* do Web site eifu.goremedical.com uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados onde este produto está disponível. ^{Rx} Only

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Número do registro a ANVISA: 80067930038.

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis. Número do registro a ANVISA: 80067930040.

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas registradas de um membro do grupo de empresas afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs "Together, improving life" são marcas comerciais de uma empresa da Gore. 26AR1086-PT01 JUNHO DE 2026 MAT-0948-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 Austrália / Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

