

APOSTILA DE PLANEJAMENTO DE CASOS EVAR LATAM

Índice

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis e GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis

Tabela de tamanhos	2–7
Planejamento de casos	8–17
Chave de resposta do planejamento de casos	18–22

GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis

Tabela de tamanhos	24–27
Planejamento de casos	28–34
Chave de resposta do planejamento de casos	35–38

Os dispositivos selecionados para estes exercícios estão baseados no guia de tamanhos da [GORE® EXCLUDER® Infrarenal Device Family] conforme descrito nas Instruções de Uso (IFU) do dispositivo. As decisões finais de tratamento ao utilizar a [GORE® EXCLUDER® Infrarenal Device Family] ficam a critério exclusivo do médico e do paciente.

As informações fornecidas têm o propósito de servir como orientação geral com base nas práticas médicas atuais na área. As etapas aqui descritas podem não estar completas e não se destinam a substituir as *Instruções de Uso* (IFU) nem a formação, o treinamento e o julgamento profissional dos profissionais de saúde (HCPs). Os profissionais de saúde autorizados continuam sendo os responsáveis por tomar decisões sobre o atendimento ao paciente e o uso de tecnologias médicas.

A Gore não promove usos *off-label* de seus dispositivos.

GORE® EXCLUDER®

AAA Endoprosthesis

GORE® EXCLUDER®

Conformable AAA Endoprosthesis

CASOS DE ESTUDO



Together, improving life



Tabela de tamanhos

■ Endoprótese do tronco-ramo ipsilateral

Número de catálogo ^a	Diâmetro interno previsto da aorta (mm)	Diâmetro da endoprótese aórtica (mm)	Diâmetro interno da artéria ilíaca (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho recomendado da bainha (Fr)
RLT231212K	19–21	23	10–11	12	12	16
RLT231214K	19–21	23	10–11	12	14	16
RLT231216K	19–21	23	10–11	12	16	16
RLT231218K	19–21	23	10–11	12	18	16
RLT231412K	19–21	23	12–13,5	14,5	12	16
RLT231414K	19–21	23	12–13,5	14,5	14	16
RLT231416K	19–21	23	12–13,5	14,5	16	16
RLT231418K	19–21	23	12–13,5	14,5	18	16
RLT261212K	22–23	26	10–11	12	12	16
RLT261214K	22–23	26	10–11	12	14	16
RLT261216K	22–23	26	10–11	12	16	16
RLT261218K	22–23	26	10–11	12	18	16
RLT261412K	22–23	26	12–13,5	14,5	12	16
RLT261414K	22–23	26	12–13,5	14,5	14	16
RLT261416K	22–23	26	12–13,5	14,5	16	16
RLT261418K	22–23	26	12–13,5	14,5	18	16
RLT281212K	24–26	28,5	10–11	12	12	18
RLT281214K	24–26	28,5	10–11	12	14	18
RLT281216K	24–26	28,5	10–11	12	16	18
RLT281218K	24–26	28,5	10–11	12	18	18
RLT281412K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	12	18
RLT281414K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	14	18
RLT281416K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	16	18
RLT281418K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	18	18
RLT311413K	27–29	31	12–13,5	14,5	13	18
RLT311415K	27–29	31	12–13,5	14,5	15	18
RLT311417K	27–29	31	12–13,5	14,5	17	18
RLT351414K	30–32	35	12–13,5	14,5	14	18
RLT351416K	30–32	35	12–13,5	14,5	16	18
RLT351418K	30–32	35	12–13,5	14,5	18	18

^a Os números de catálogo podem mudar entre regiões — use a letra apropriada no final do número de catálogo.

Tabela de tamanhos

■ Endoprótese do ramo contralateral

Número de catálogo ^b	Diâmetro interno ilíaco previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (cm)	Tamanho recomendado da bainha (Fr)
PLC121000K	10–11	12	10	12
PLC121200K	10–11	12	12	12
PLC121400K	10–11	12	14	12
PLC141000K	12–13,5	14,5	10	12
PLC141200K	12–13,5	14,5	12	12
PLC141400K	12–13,5	14,5	14	12
PLC161000K ^c	13,5–14,5	16	9,5	12
PLC161200K ^c	13,5–14,5	16	11,5	12
PLC161400K ^c	13,5–14,5	16	13,5	12
PLC181000K ^c	14,5–16,5	18	9,5	12
PLC181200K ^c	14,5–16,5	18	11,5	12
PLC181400K ^c	14,5–16,5	18	13,5	12
PLC201000K ^c	16,5–18,5	20	9,5	12
PLC201200K ^c	16,5–18,5	20	11,5	12
PLC201400K ^c	16,5–18,5	20	13,5	12
PLC231000K ^c	18,5–21,5	23	10	14
PLC231200K ^c	18,5–21,5	23	12	14
PLC231400K ^c	18,5–21,5	23	14	14
PLC271000K ^c	21,5–25,0	27	10	15
PLC271200K ^c	21,5–25,0	27	12	15
PLC271400K ^c	21,5–25,0	27	14	15

■ Endoprótese de extensão ilíaca

Número de catálogo ^b	Diâmetro interno ilíaco previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PLL161007K	8–9	10	7	12
PLL161207K	10–11	12	7	12
PLL161407K	12–13,5	14,5	7	12

■ Endoprótese de extensão aórtica

Número de catálogo ^b	Diâmetro interno aórtico previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PLA230300K	19–21	23	3,3	16
PLA260300K	22–23	26	3,3	16
PLA280300K	24–26	28,5	3,3	16
PLA320400K	27–29	32	4,5	17
PLA360400K	30–32	36	4,5	18

^b Os números de catálogo podem mudar entre regiões — use a letra apropriada no final do número de catálogo.

^c OBSERVE: Todas as endopróteses do ramo contralateral de grande diâmetro (16/18/20/23/27 mm) podem ser utilizadas como extensores ilíacos.

Tabela de tamanhos

■ Endoprótese do tronco-ramo ipsilateral

Número de catálogo ^d	Diâmetro previsto do vaso aórtico (mm)	Diâmetro da endoprótese aórtica (mm)	Diâmetro previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho recomendado da bainha (Fr)
CXT201212K	16–18	20	10–11	12	12	15
CXT201412K	16–18	20	12–13,5	14,5	12	15
CXT231412K	19–21	23	12–13,5	14,5	12	15
CXT261412K	22–23	26	12–13,5	14,5	12	16
CXT281412K	24–26	28,5	12–13,5	14,5	12	16
CXT321414K	27–29	32	12–13,5	14,5	14	18
CXT361414K	30–32	36	12–13,5	14,5	14	18

■ Endoprótese de extensão aórtica

Número de catálogo ^d	Diâmetro aórtico interno previsto (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho recomendado da bainha (Fr)
CXA200005K	16–18	20	4,5	15
CXA230005K	19–21	23	4,5	15
CXA260005K	22–23	26	4,5	15
CXA280005K	24–26	28,5	4,5	16
CXA320005K	27–29	32	4,5	18
CXA360005K	30–32	36	4,5	18

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath

Número de catálogo ^d	Tamanho da bainha (Fr)	Número de catálogo	Tamanho da bainha (Fr)
DSF1233K	12	DSF1533K	15
DSF1245K	12	DSF1633K	16
DSF1433K	14	DSF1833K	18

^d Os números de catálogo podem mudar entre regiões — use a letra apropriada no final do número de catálogo.

GORE® EXCLUDER®


AAA Endoprosthesis

GORE® EXCLUDER®

Conformable AAA Endoprosthesis



Tabela de tamanhos

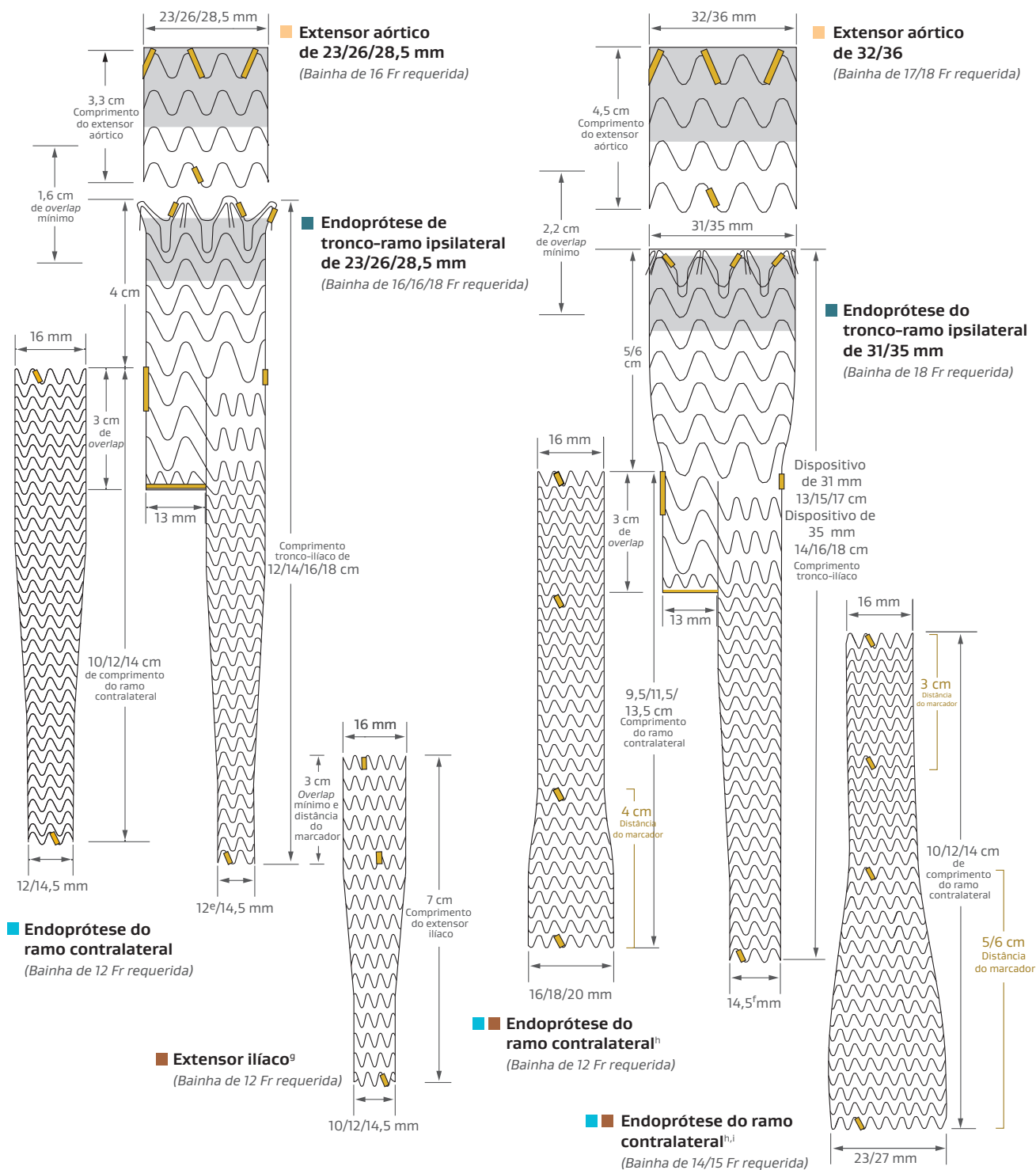

^e 12 mm disponível apenas em alguns tamanhos de tronco.


^f 14,5 mm disponível apenas em alguns tamanhos de tronco.

^g Os tamanhos tradicionais do extensor ilíaco (10/12/14,5 mm) não são compatíveis com endopróteses do ramo contralateral de grande diâmetro (16/18/20/23/27 mm). Endoprótese do ramo contralateral.

^h Todas as endopróteses do ramo contralateral de grande diâmetro (16/18/20/23/27 mm) podem ser utilizadas como extensores ilíacos.


ⁱ A endoprótese do ramo contralateral de 27 mm x 10 cm não possui um marcador radiopaco 6 cm acima da extremidade distal.

Tabela de tamanhos

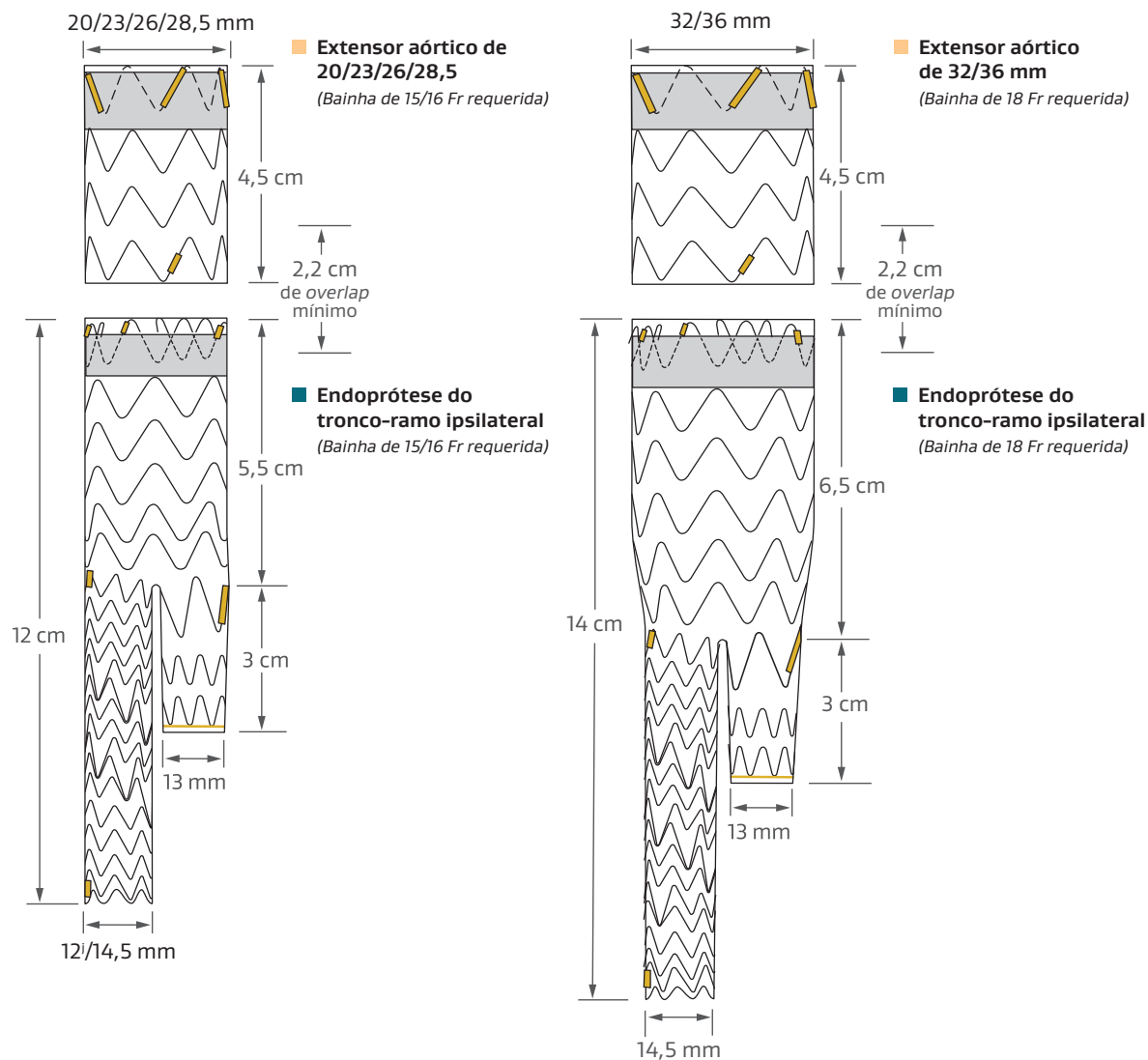


¹ Somente CXT201212K.

PLANEJAMENTO DE CASO 1

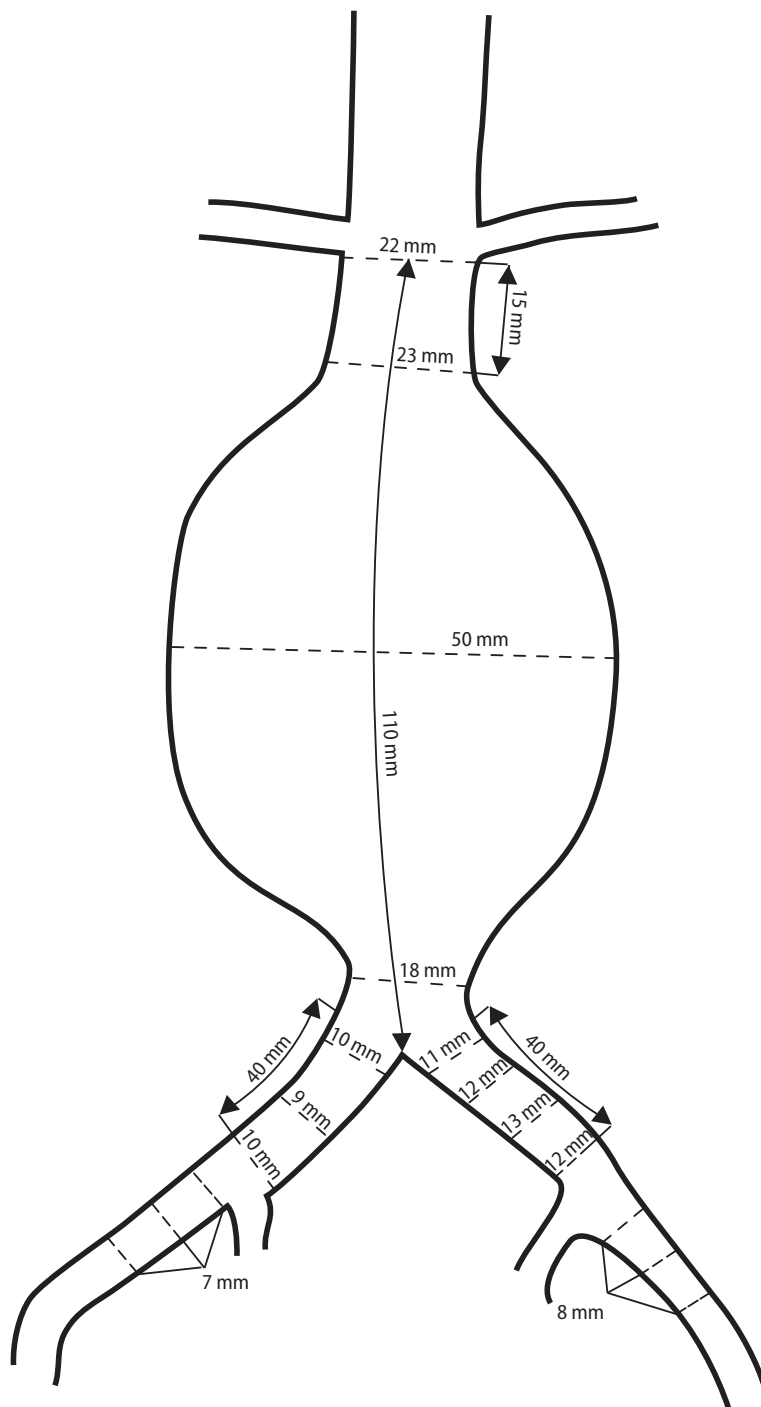


PLANEJAMENTO DE CASO 2

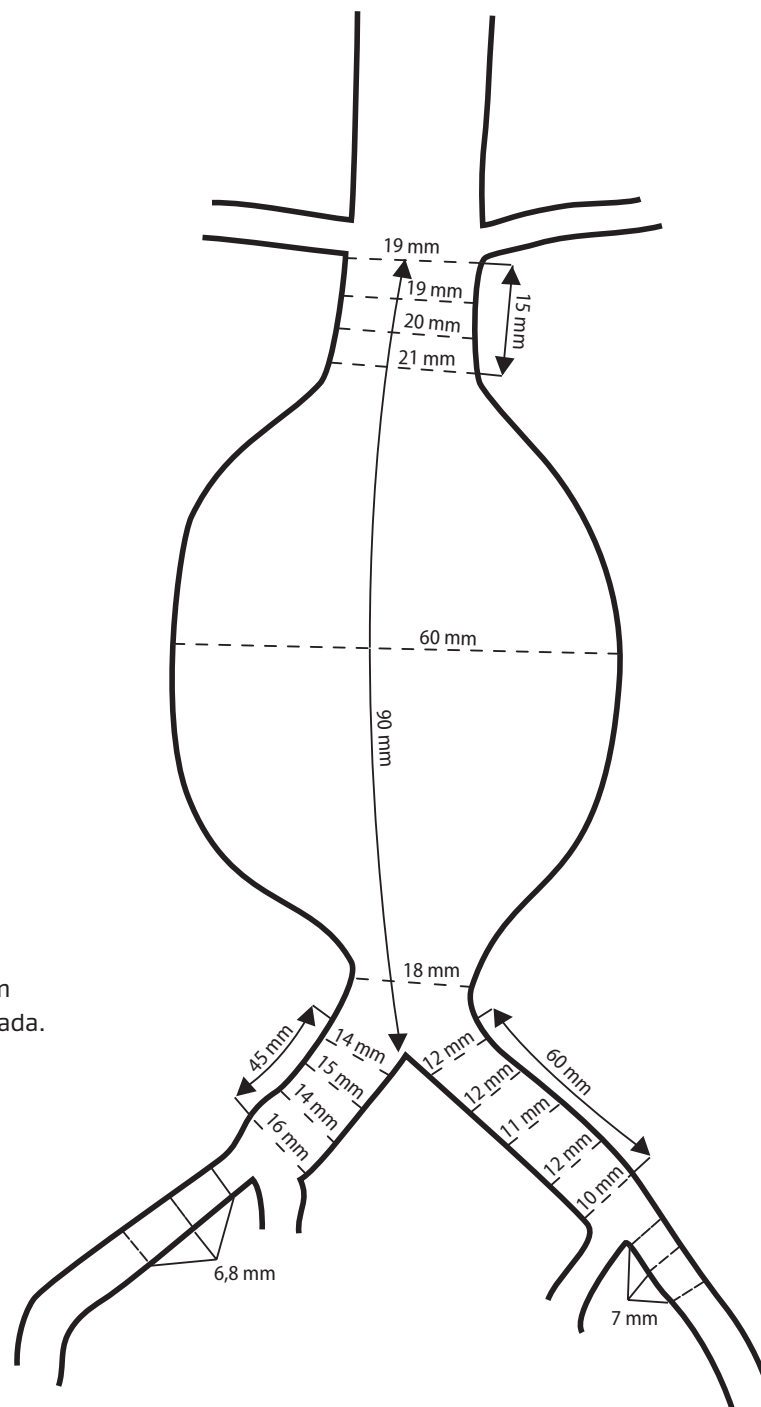


Observação: Todas as medidas foram obtidas em tomografia computadorizada.

PLANEJAMENTO DE CASO 3

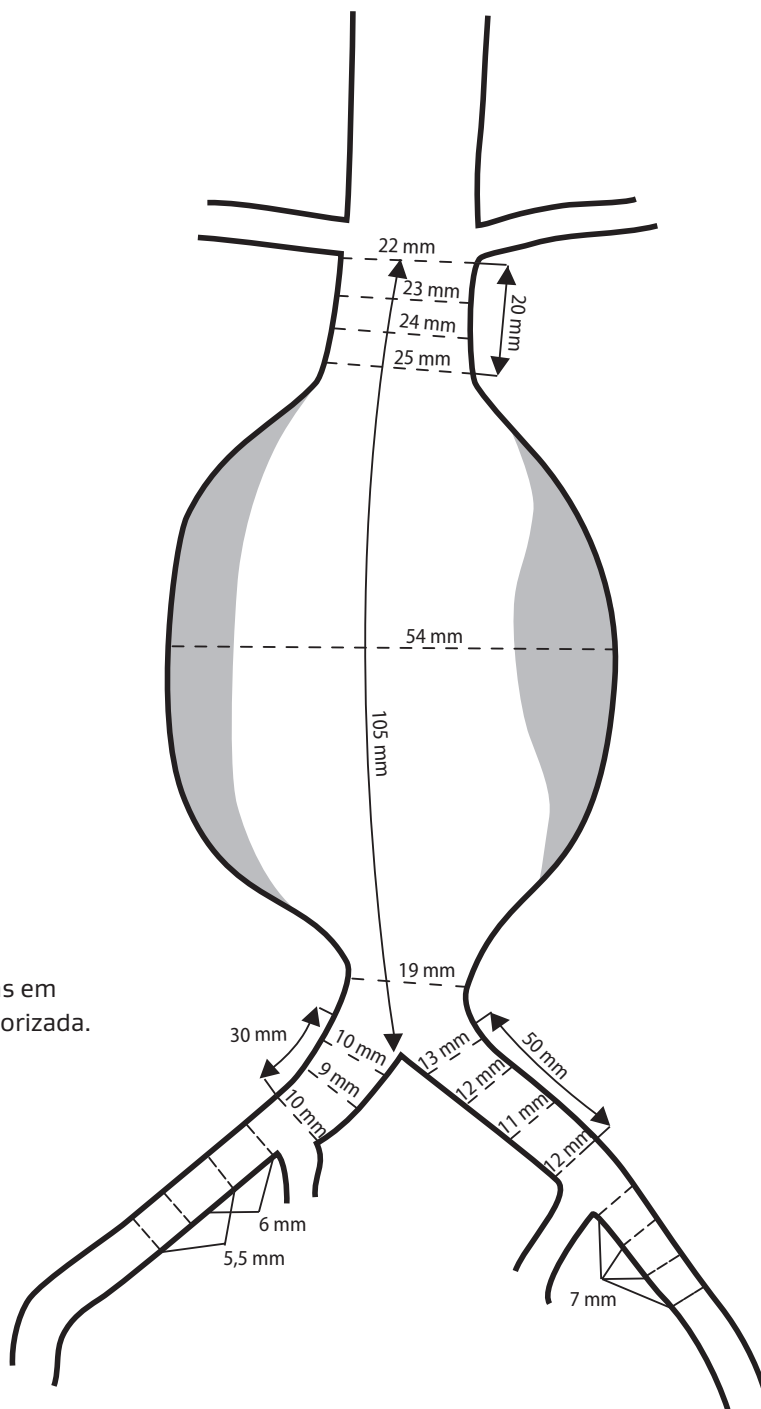


Observação: Todas as medidas foram obtidas em tomografia computadorizada.


PLANEJAMENTO DE CASO 4

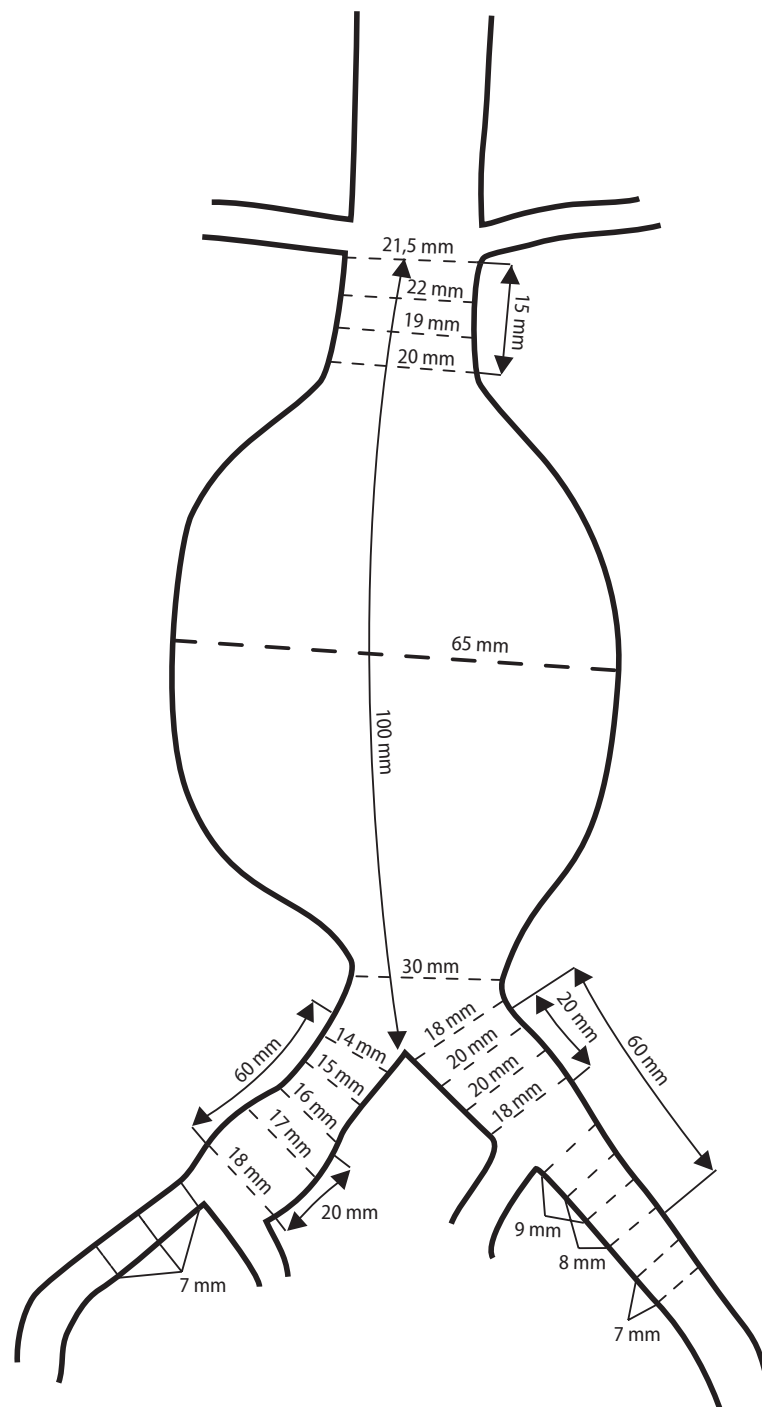


PLANEJAMENTO DE CASO 5

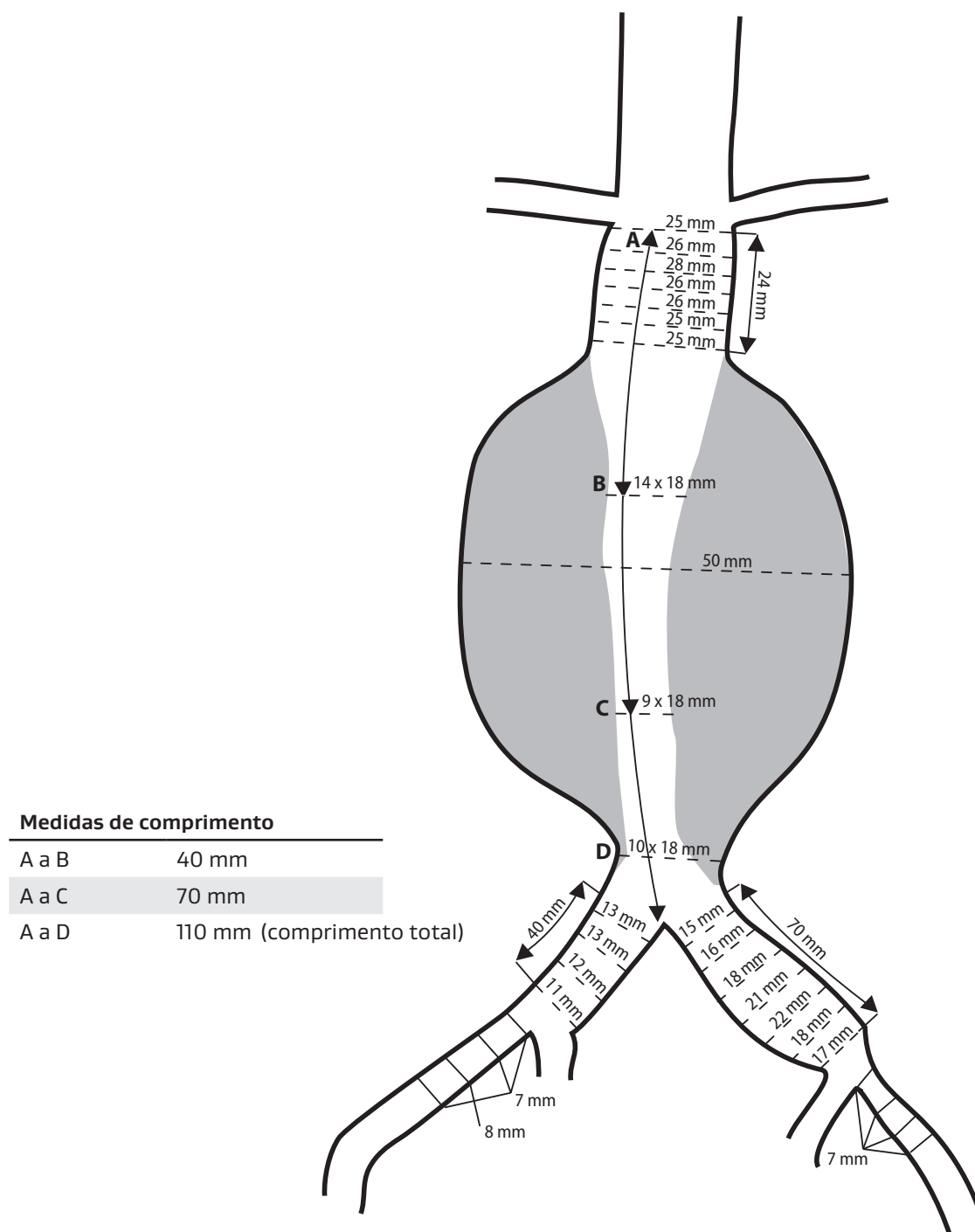

PLANEJAMENTO DE CASO 6

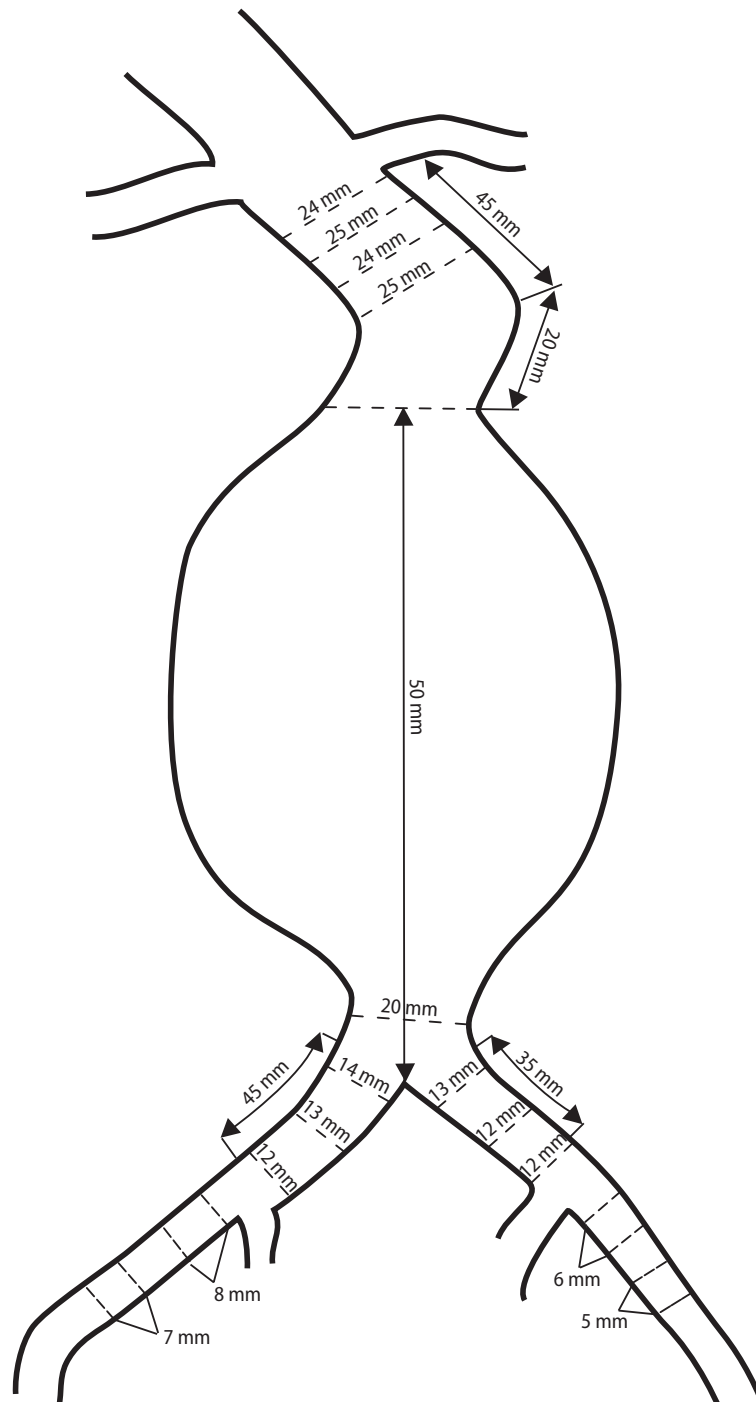

PLANEJAMENTO DE CASO 7

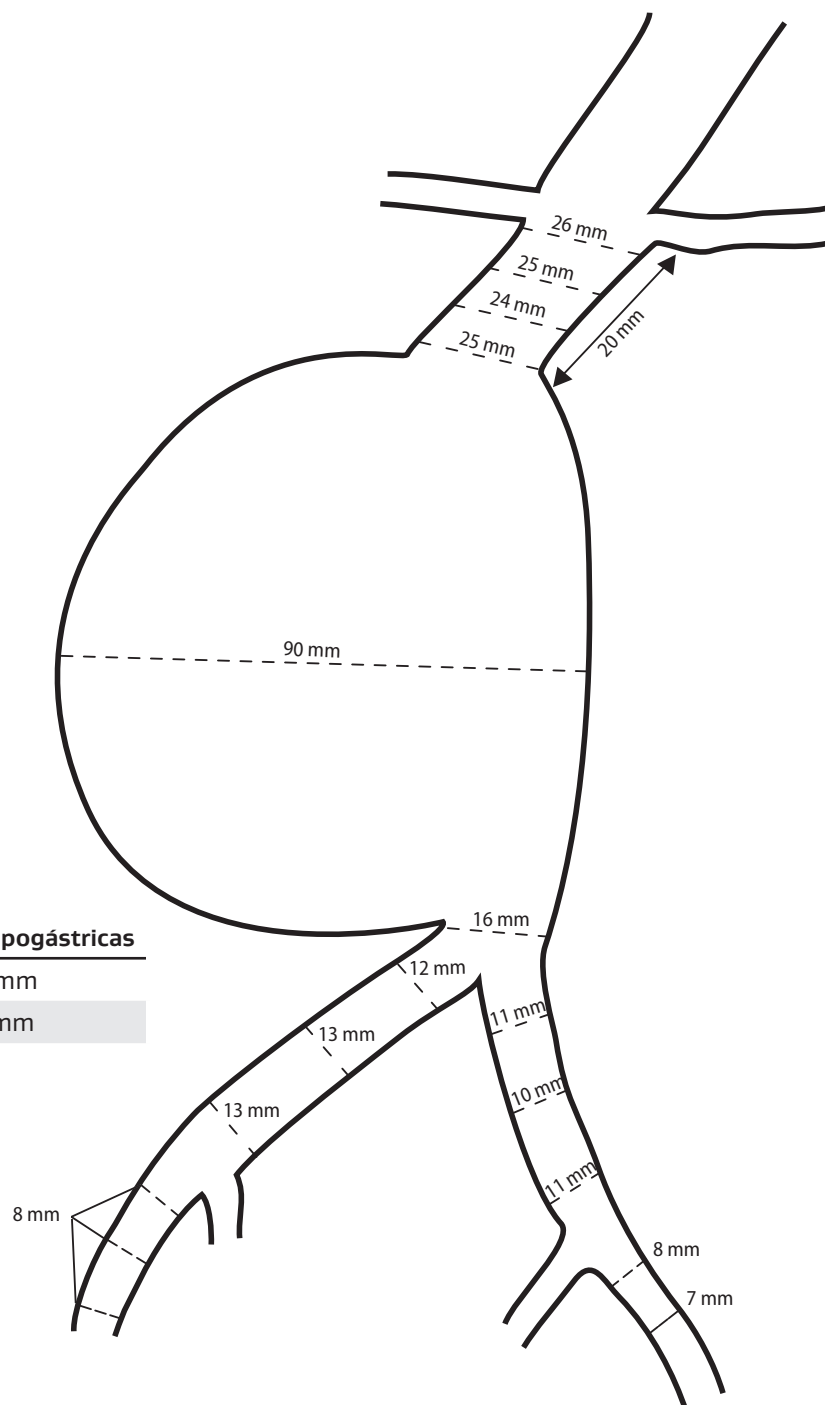


Comprimentos até as hipogástricas

Lado esquerdo 160 mm


Lado direito 170 mm

Ângulo do colo 60°


PLANEJAMENTO DE CASO 8

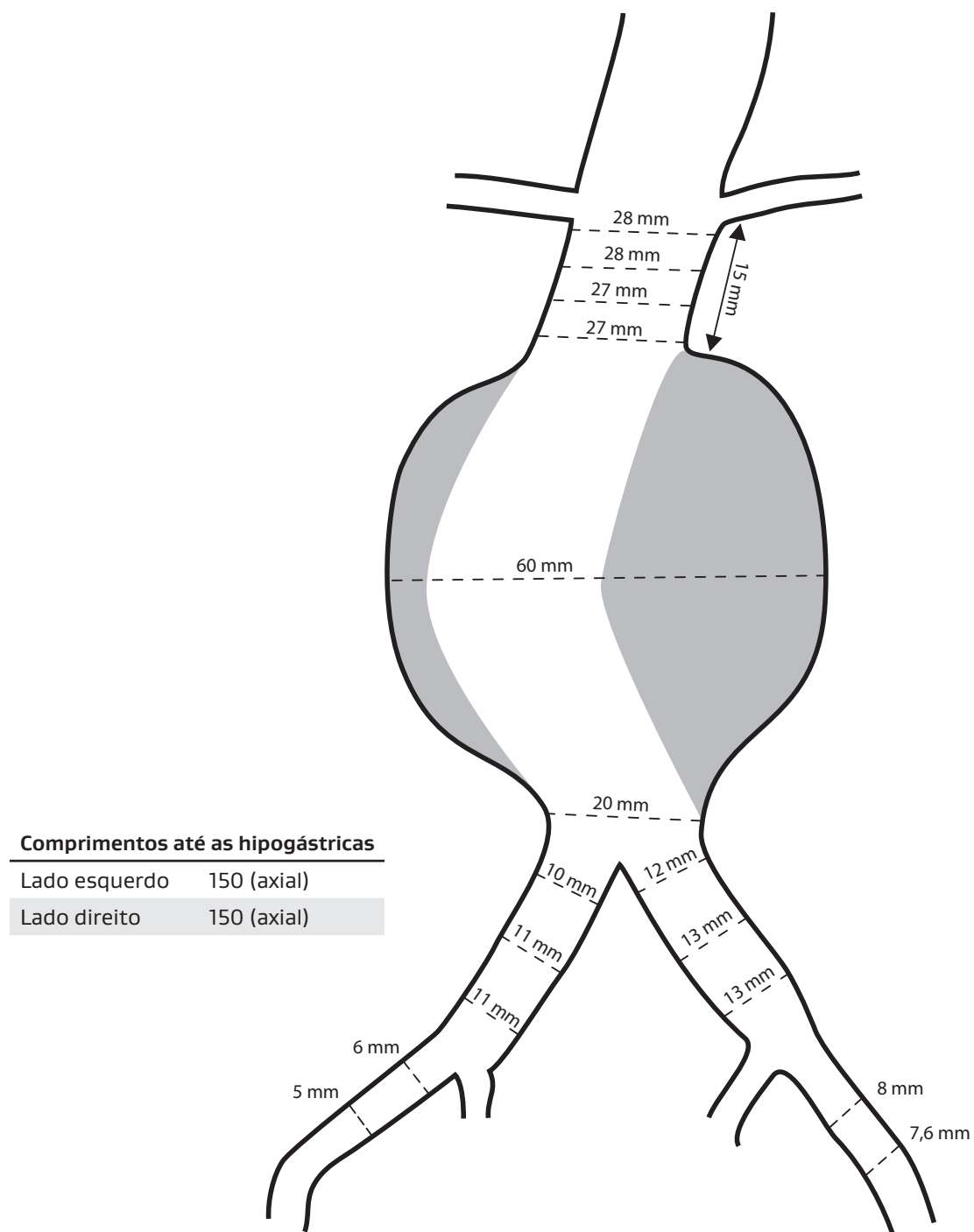

PLANEJAMENTO DE CASO 9

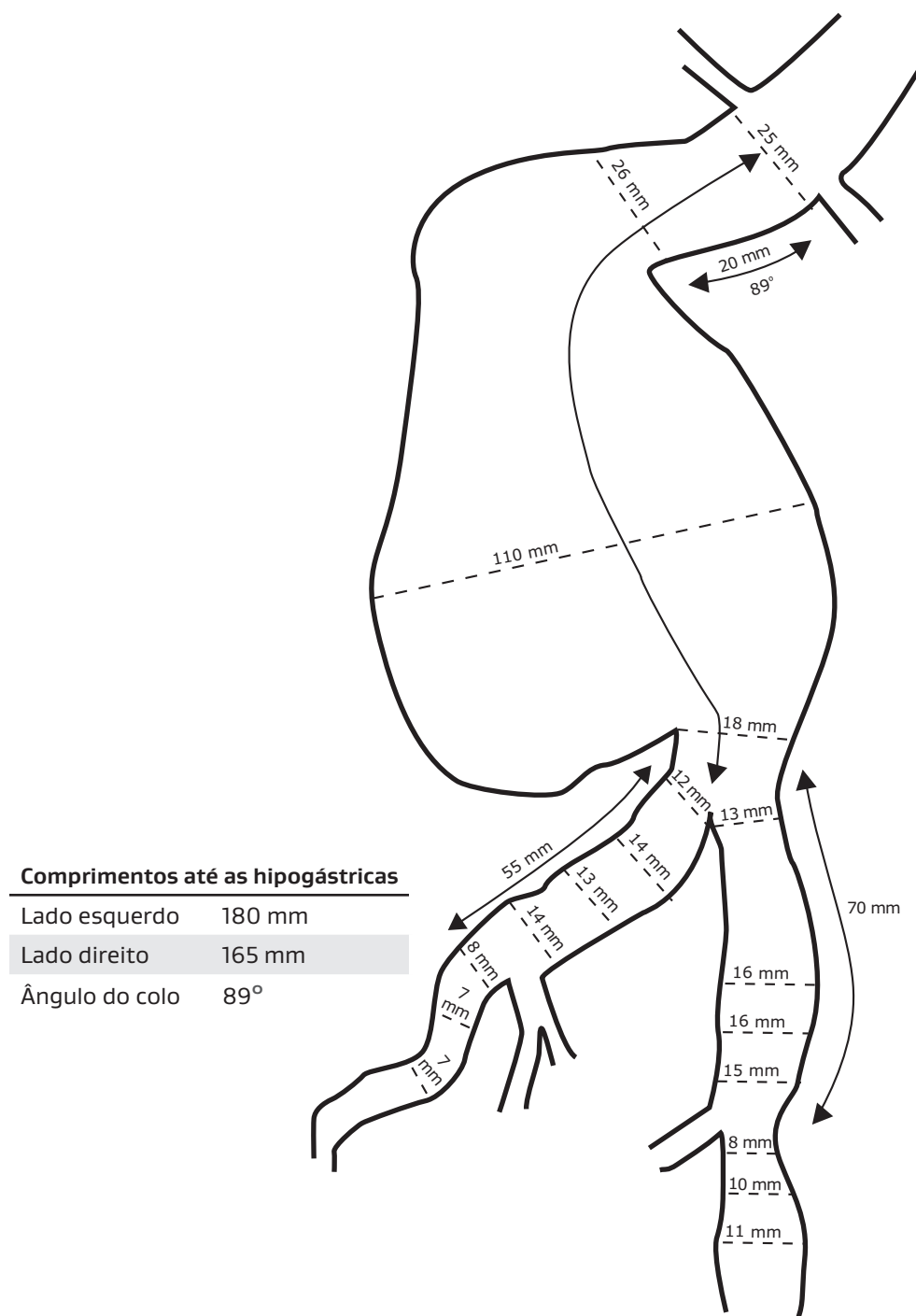

PLANEJAMENTO DE CASO 10

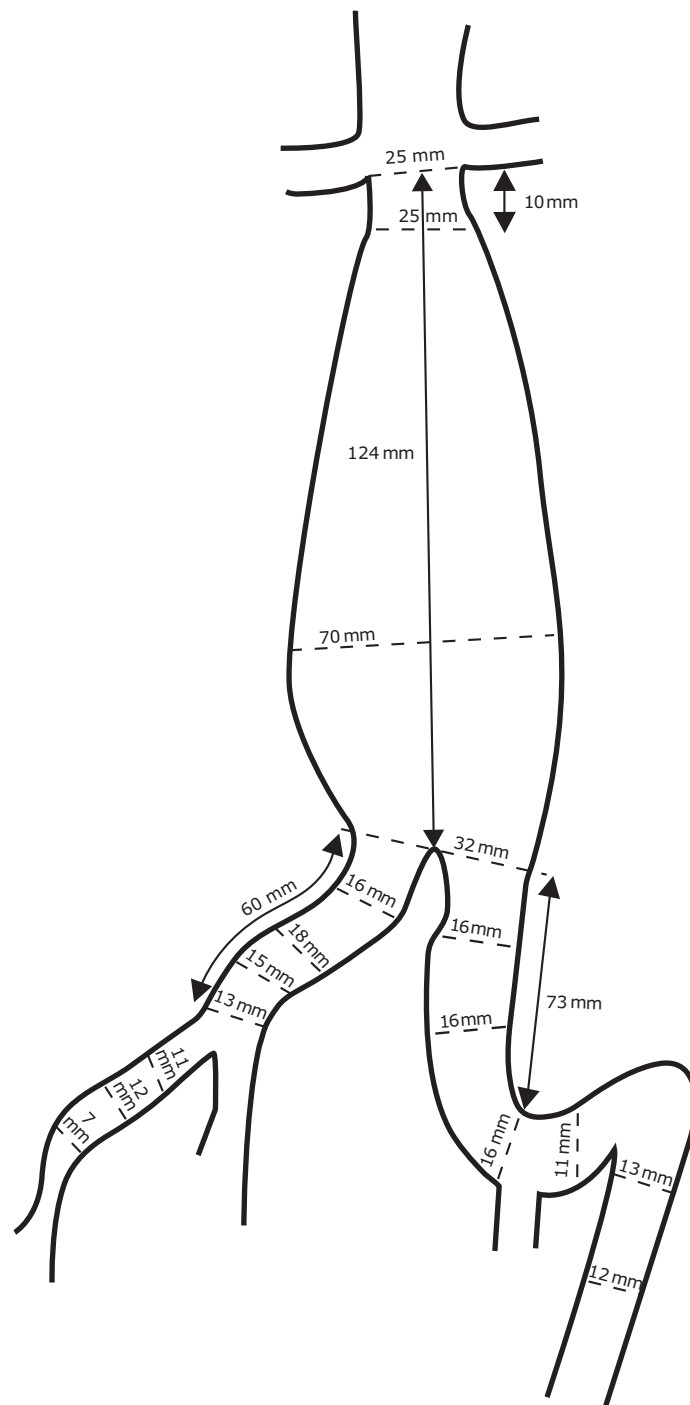

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVES DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 1

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis	Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis
Plano A ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito) – 26 mm x 12 mm x 14 cm (RLT261214K) ▪ Componente do ramo contralateral (esquerdo) – 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K) Plano B ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 26 mm x 14,5 mm x 14 cm (RLT261414K) ▪ Componente do ramo contralateral (direito) – 12 mm x 10 cm (PLC121000K)	Plano A ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito) – 26 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT261412K) – Extensão com PLL161207K ▪ Componente do ramo contralateral (esquerdo) – 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K) Plano B ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 26 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT261412K) – Extensão com PLL161407 ou PLC141000K ▪ Componente do ramo contralateral (direito) – 12 mm x 10 cm (PLC121000K)

PLANEJAMENTO DE CASO 2

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis	Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis
Plano A ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 23 mm x 14,5 mm x 14 cm (RLT231414K) ▪ Componente do ramo contralateral (direito) – 18 mm x 9,5 cm (PLC181000K)	N/A

PLANEJAMENTO DE CASO 3

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis	Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis
Plano A ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 28,5 mm x 14,5 mm x 14 ou 16 cm RLT281414K ou RLT281416K ▪ Componente do ramo contralateral (direito) – 12 mm x 10 cm (PLC121000K)	Plano A ▪ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K) – Extensão com 14,5 mm x 7 cm (PLL161407K) ▪ Componente do ramo contralateral (direito) – 12 mm x 7 cm (PLL16120K)

As recomendações de dispositivo e tamanho para esses exercícios são exemplos ilustrativos baseados no guia de tamanhos da [GORE® EXCLUDER® Infrarenal Device Family] nas *Instruções de Uso* (IFU). Os casos reais envolvem variáveis que podem afetar a seleção de dispositivo e tamanho do profissional da saúde (HCP). Os profissionais da saúde continuam sendo os responsáveis por tomar decisões sobre o atendimento ao paciente e o uso de tecnologias médicas.

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVES DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 4

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
 - 26 mm x 14,5 mm x 12 cm (RLT261412K)
 - Extensão com 10 mm x 7 cm (PLL161007K)
 - Cobertura da interna (esquerda) devido ao comprimento da artéria ilíaca comum
- Componente do ramo contralateral (direito)
 - 20 mm x 11,5 cm (PLC201200K)

Plano B

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
 - 26 mm x 14,5 mm x 12 cm (RLT261412K)
 - Extensão com 20 mm x 9,5 cm (PLC201000K)
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
 - 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K)
 - Extensão com 10 mm x 7 cm (PLL161007K)

Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
 - 26 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT261412K)
 - Extensão com 10 mm x 7 cm (PLL161007K)
 - Cobertura da interna (esquerda) devido ao comprimento da artéria ilíaca comum
- Componente do ramo contralateral (direito)
 - 20 mm x 11,5 cm (PLC201200K)

Plano B

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
 - 26 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT261412K)
 - Extensão com PLC201000K
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
 - 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K) + 10 mm x 7 cm (PLL161007K)

PLANEJAMENTO DE CASO 5

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
 - 28,5 mm x 14,5 mm x 14 cm (RLT281414K)
- Componente do ramo contralateral
 - 23 mm x 14 cm (PLC231400K)

Plano B

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
 - 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (RLT281412K)
 - Extensão com 23 mm x 11,5 cm (PLC231200K)
- Componente do ramo contralateral (direito)
 - 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K)

Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
 - 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K)
 - Extensão com PLL161407 ou PLC141000K
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
 - 23 mm x 14 cm (PLC231400K)

Plano B

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
 - 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K)
 - Extensão com 23 mm x 10 cm (PLC231000K)
- Componente do ramo contralateral (direito)
 - 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K)

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVES DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 6

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
– 28,5 mm x 14,5 mm x 16 cm (RLT281416K)
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
– 14,5 mm x 10 cm ou 12 cm
(PLC141000K ou PLC141200K)

Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
– 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K)
– Extensão com PLL161407 ou PLC141000K
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
– 14,5 mm x 10 cm (PLC141000K)

PLANEJAMENTO DE CASO 7

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
– 28,5 mm x 12 mm x 16 cm (RLT281216K)
- Componente do ramo contralateral (direito)
– 14,5 mm x 12 cm (PLC141200K)

Plano B

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
– 28,5 mm x 14,5 mm x 16 cm (RLT281416K)
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
– 12 mm x 12 cm (PLC121200K)

Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito)
– 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K)
– Extensão com PLC141000K
- Componente do ramo contralateral (esquerdo)
– 12 mm x 10 cm (PLC121000K)

Plano B

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
– 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K)
– Extensão com 12 mm x 10 cm (PLC121000K) ou
12mm x 7 cm (PLL161207K)
- Componente do ramo contralateral (direito)
– 14,5 mm x 12 cm ou 14,5 mm x 10 cm
(PLC141200K ou PLC141000K)

PLANEJAMENTO DE CASO 8

Gore® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
– 31 mm x 14,5 mm x 15 cm (RLT311415K)
- Componente do ramo contralateral (direito)
– 12 mm x 10 cm (PLC121000K)

Gore® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis

Plano A

- Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo)
– 32 mm x 14,5 mm x 14 cm (CXT321414K)
– Extensão com 14,5 mm x 7 cm (PLL161407K)
- Componente do ramo contralateral (direito)
– 12 mm x 10 cm (PLC121000K)

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVES DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 9

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis	GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis
N/A	Plano A ■ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K) – Extensão com 18 mm x 10 cm (PLC181000K) ■ Componente do ramo contralateral (direito) – 16 mm x (10/12) cm (PLC16[10/12]00K) Plano B ■ Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito) – 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K) – Extensão com 16 mm x 10 cm (PLC161000K) ■ Componente do ramo contralateral (esquerdo) – 18 mm x 12 cm (PLC181200K)

PLANEJAMENTO DE CASO 10

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis	GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis
N/A	Plano A ■ Componente do tronco-ramo ipsilateral (direito) – 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K) – Extensão com 16/18 mm x 10 cm (PLC[16/18]1000K) ■ Componente do ramo contralateral (esquerdo) – 18 mm x 14 cm (PLC181400K) Plano B ■ Componente do tronco-ramo ipsilateral (esquerdo) – 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (CXT281412K) – Extensão com 18 mm x 10 cm (PLC181000K) ■ Componente do ramo contralateral (direito) – (16/18) mm x (12/14) cm (PLC[16/18][12/14]00K)

NOTAS

GORE® EXCLUDER

Iliac Branch Endoprosthesis

CASOS DE ESTUDO



Together, improving life



Tabela de tamanhos

■ Endoprótese do tronco-ramo ipsilateral

Consulte as páginas 2 a 4 para obter informações sobre a endoprótese do tronco-ramo ipsilateral

■ Componente do ramo ilíaco

Número de catálogo ^k	Diâmetro externo previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro do extremo ilíaco (mm)	Comprimento do componente do ramo ilíaco (cm)	Tamanho recomendado da bainha (Fr)
CEB231010K	6,5–9	10	10	16
CEB231210K	10–11	12	10	16
CEB231410K	12–13,5	14,5	10	16

■ Componente ilíaco interno

Número de catálogo ^k	Diâmetro externo previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro do extremo ilíaco (mm)	Comprimento do componente do ramo ilíaco (cm)	Tamanho recomendado da bainha (Fr x cm)
HGB161007K	6,5–9	10	7	12 x 45
HGB161207K	10–11	12	7	12 x 45
HGB161407K	12–13,5	14,5	7	12 x 45

■ Endoprótese do ramo contralateral^l

Diâmetro previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro do extremo ilíaco (mm)	Comprimentos do ramo contralateral (cm)	Comprimento lateral total da endoprótese do ramo ilíaco quando inserida em troncos de 23/26/28,5 mm (cm)	Comprimento lateral total da endoprótese do ramo ilíaco quando inserida em troncos de 31 mm (cm)	Comprimento lateral total da endoprótese do ramo ilíaco quando inserida em troncos de 35 mm (cm)
17–21,5	23	10/12/14	16,5/18,5/20,5	17,5/19,5/21,5	18,5/20,5/22,5
> 21,5	27	10/12/14	16,5/18,5/20,5	17,5/19,5/21,5	18,5/20,5/22,5

^k Os números de catálogo podem mudar entre regiões — use a letra apropriada no final do número de catálogo.

^l Para utilizar a endoprótese do ramo contralateral como extensor ilíaco, consulte o Formulário de Medição/Seleção do Dispositivo da GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis: goremedical.com/resource/aq0638-en4

Tabela de tamanhos

Comprimento lateral da GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis unilateral — Componente de ponte pela porta contralateral do tronco e componente do ramo ipsilateral

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis	
Diâmetro proximal do tronco (mm)	Comprimento necessário (mm)
23/26/28,5	165
31	175
35	185

Comprimento lateral da GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis bilateral — Componente de ponte pelo ramo ipsilateral do componente do tronco-ramo ipsilateral

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis		
Diâmetro proximal da endoprótese do tronco-ramo ipsilateral (mm)	Comprimento mínimo necessário da renal até a ilíaca interna do ramo contralateral de 23 mm (mm)	Comprimento mínimo necessário da renal até a ilíaca interna do ramo contralateral de 27 mm (mm)
23/26/28,5	195	205
31	205	215
35	215	225

Dispositivos acessórios recomendados da Gore

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath


Número de catálogo ^o	Tamanho da bainha (Fr x cm)
DSFI245K	12 x 45
DSFI633K	16 x 33
DSFI833K	18 x 33


^m A extensão mínima de 23 mm no ramo contralateral é de 5 cm devido à zona cônica (*taper*) distal.

ⁿ A extensão mínima de 27 mm no ramo contralateral é de 6 cm devido à zona cônica (*taper*) distal.

^o Os números de catálogo podem mudar entre regiões — use a letra apropriada no final do número de catálogo.

GORE® EXCLUDER®
Iliac Branch Endoprosthesis

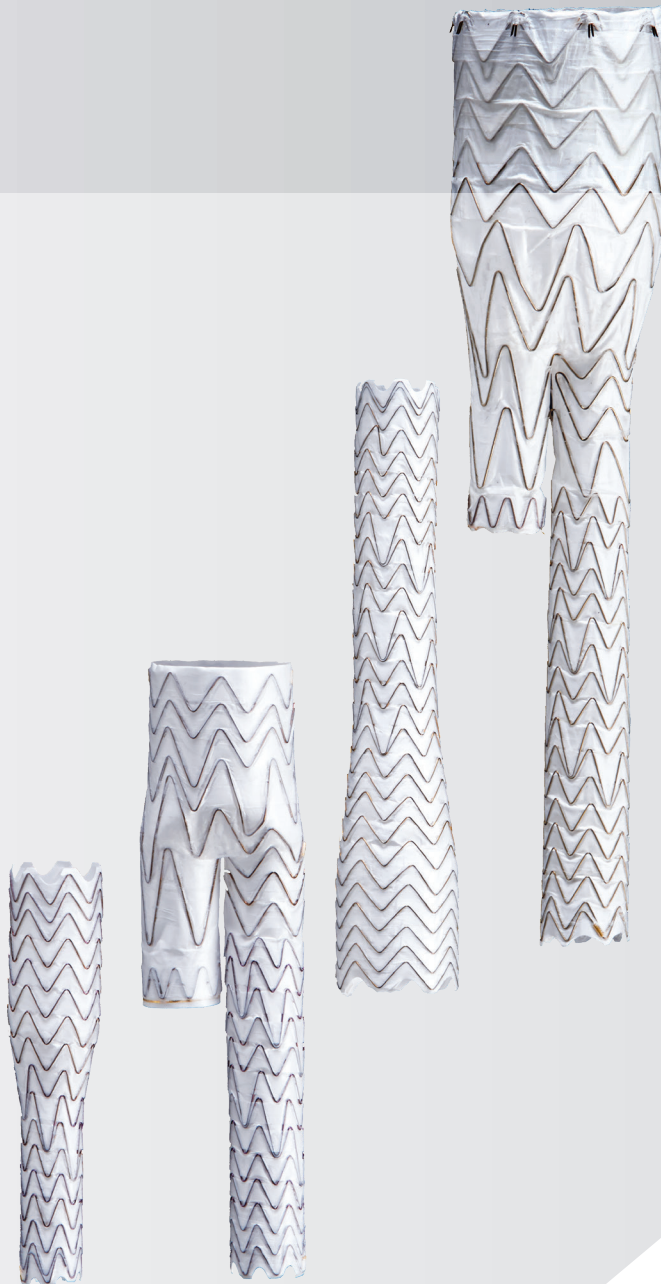

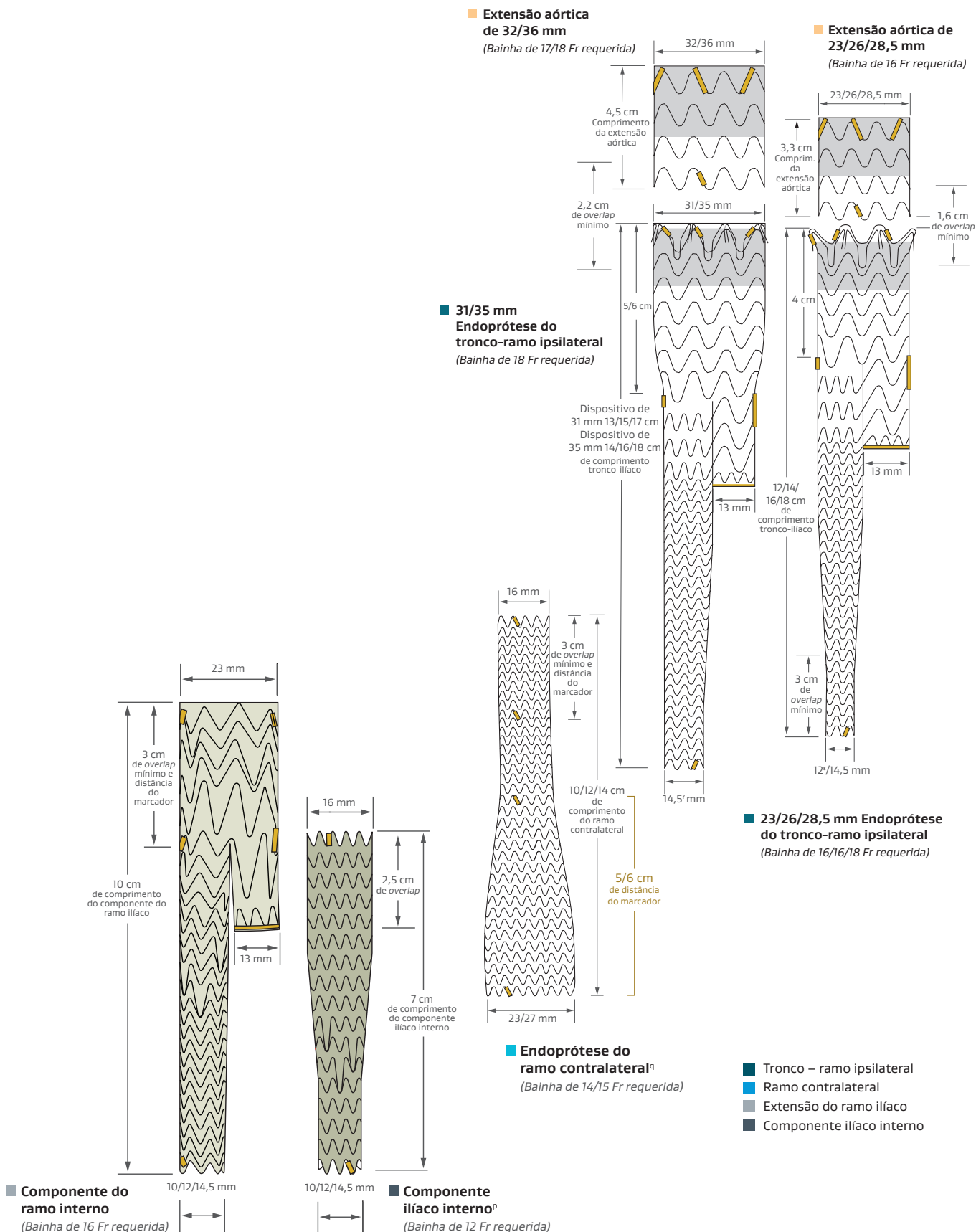


^p 12 Fr x 45 cm de bainha flexível reforçada.

^q A endoprótese do ramo contralateral de 27 mm x 10 cm não possui um marcador radiopaco 6 cm acima do extremo distal.


^r 14,5 mm disponível apenas em alguns tamanhos de tronco.

^s 12 mm disponível apenas em alguns tamanhos de tronco.


PLANEJAMENTO DE CASO 1

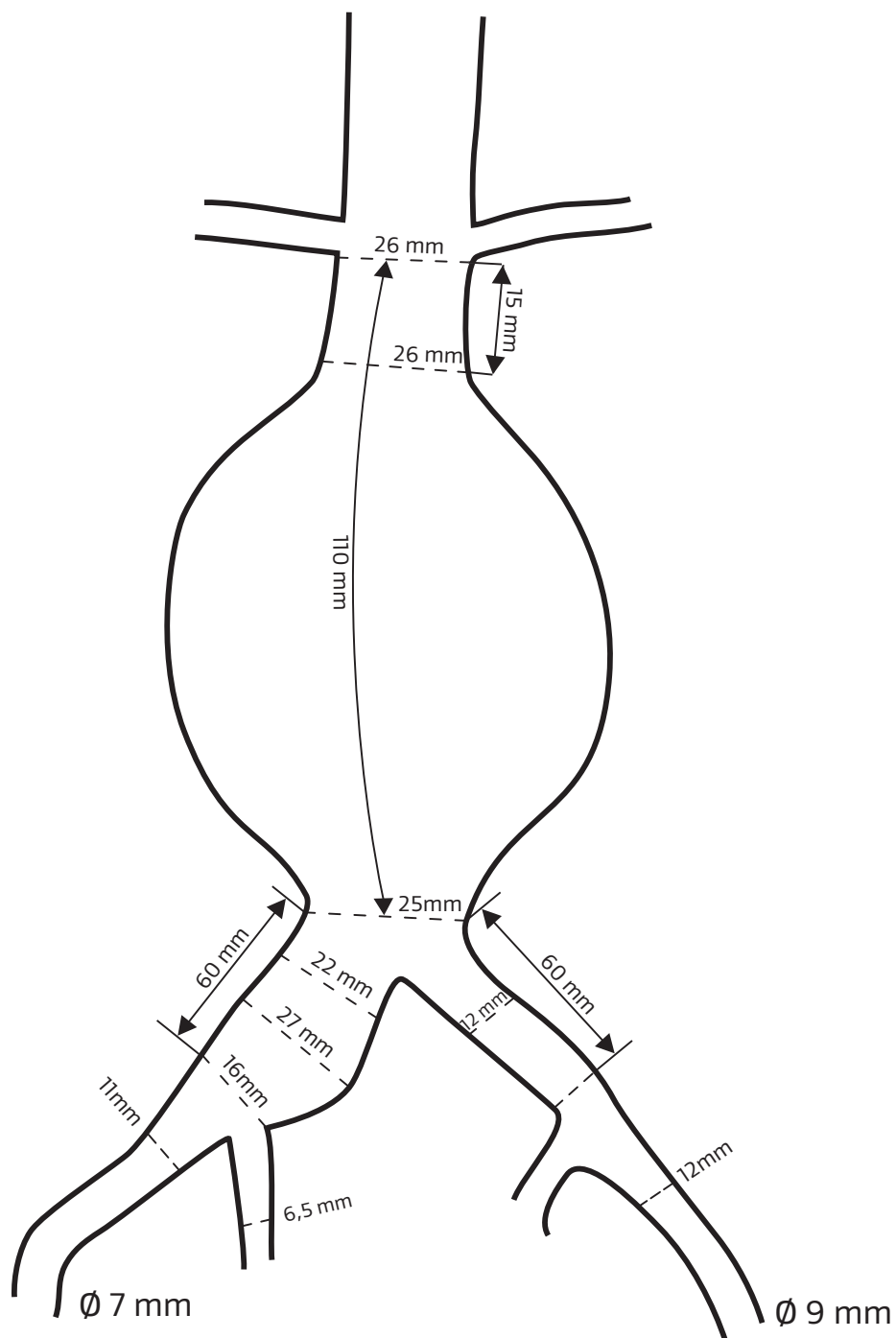


PLANEJAMENTO DE CASO 2

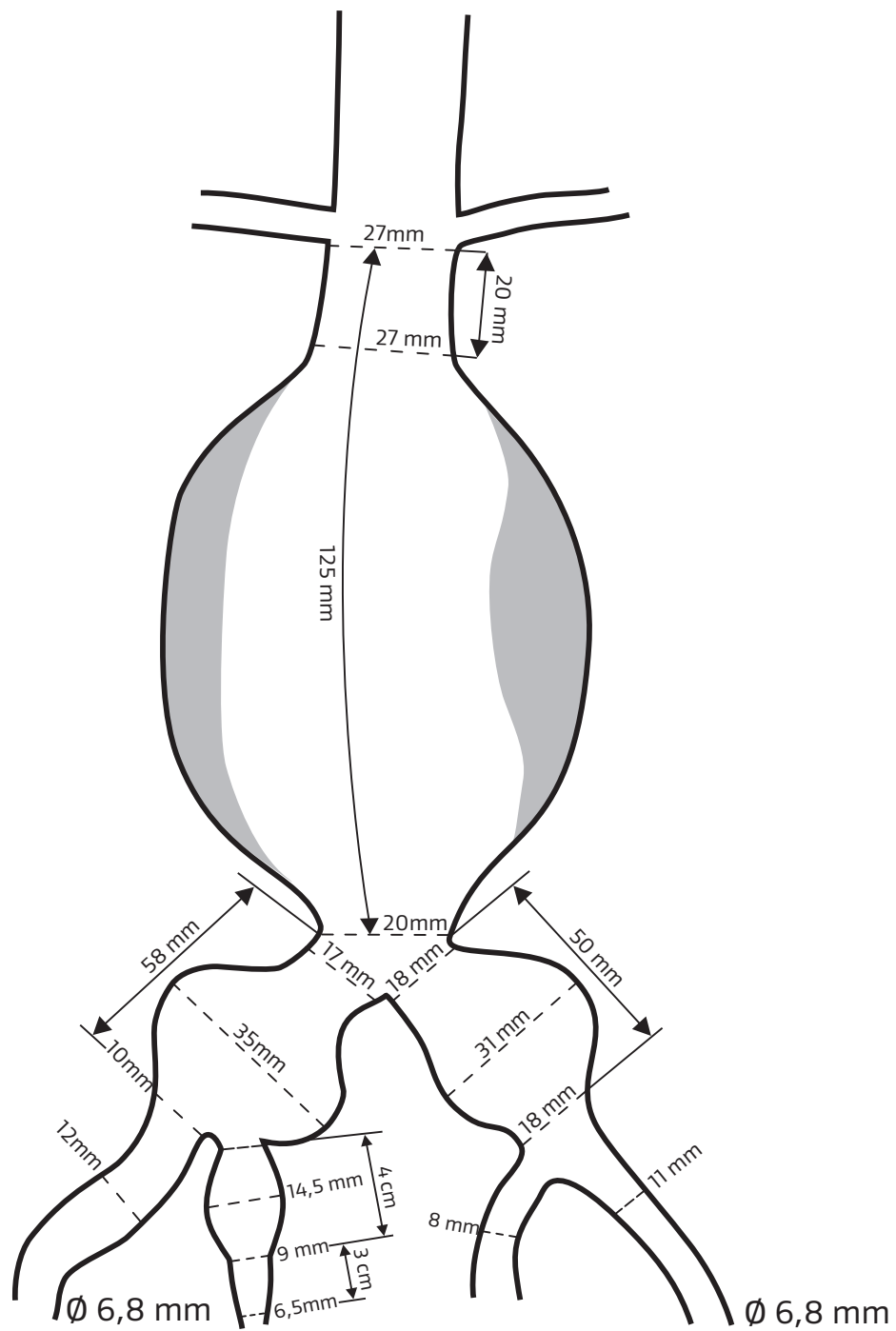


PLANEJAMENTO DE CASO 3

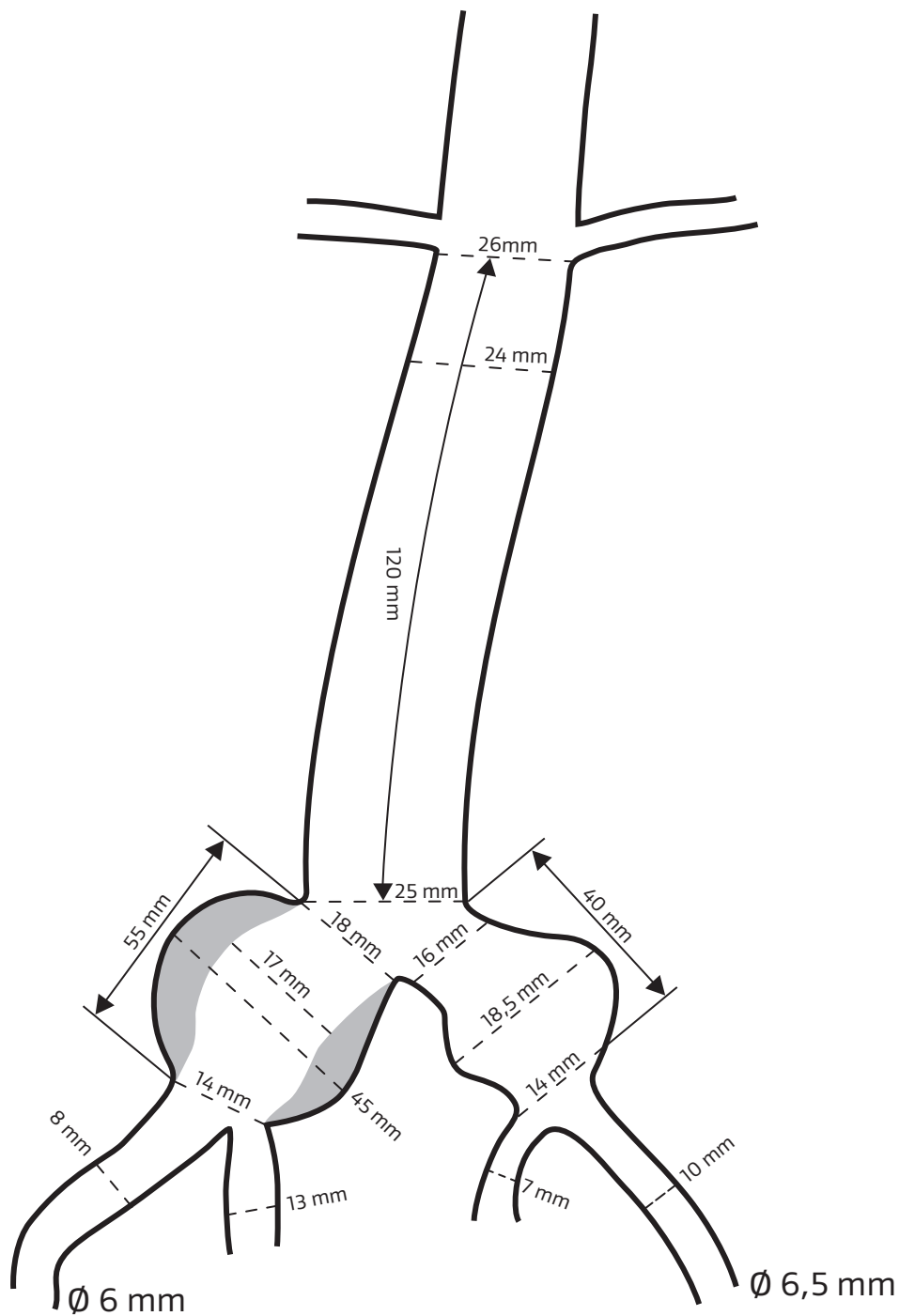


PLANEJAMENTO DE CASO 4

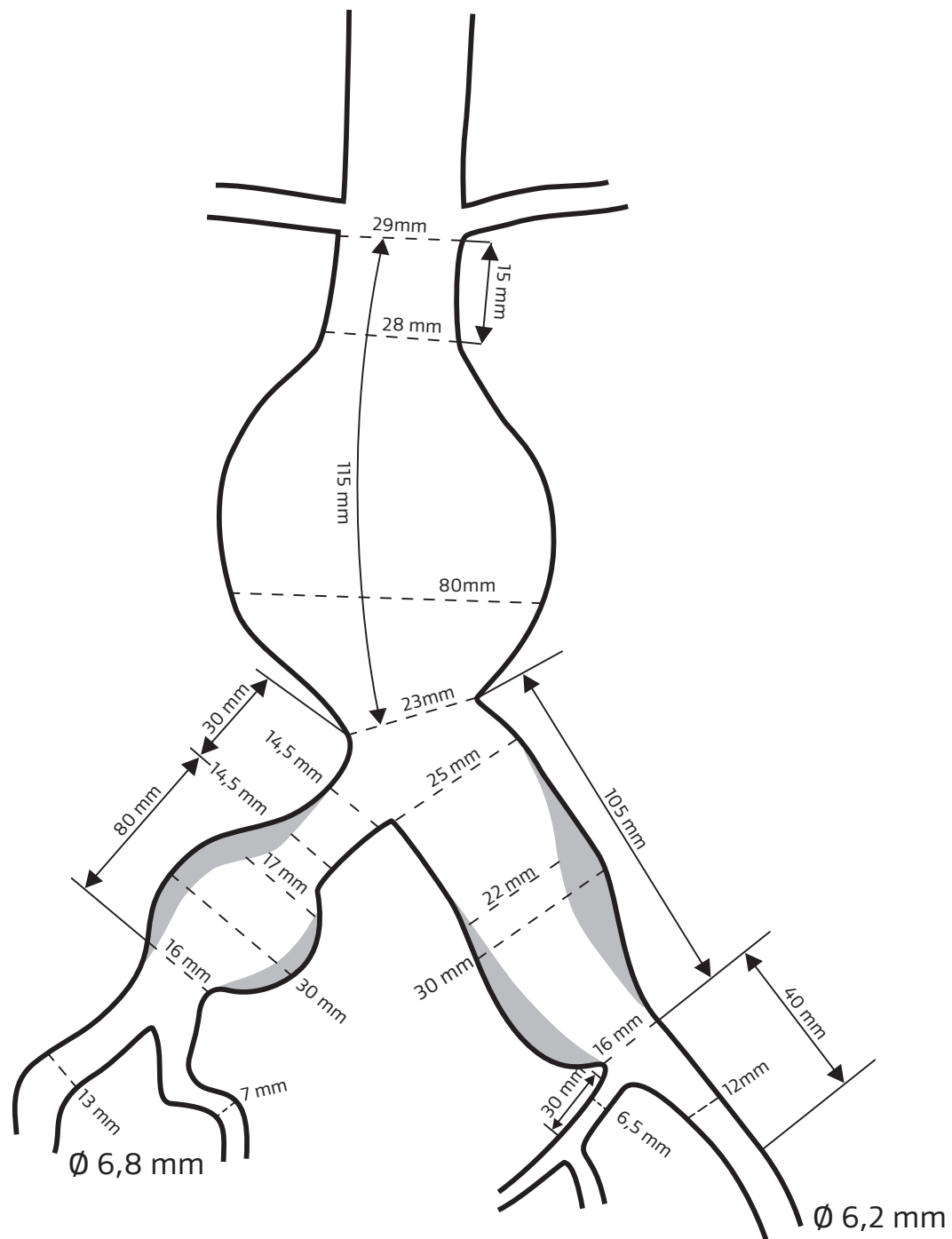

PLANEJAMENTO DE CASO 5

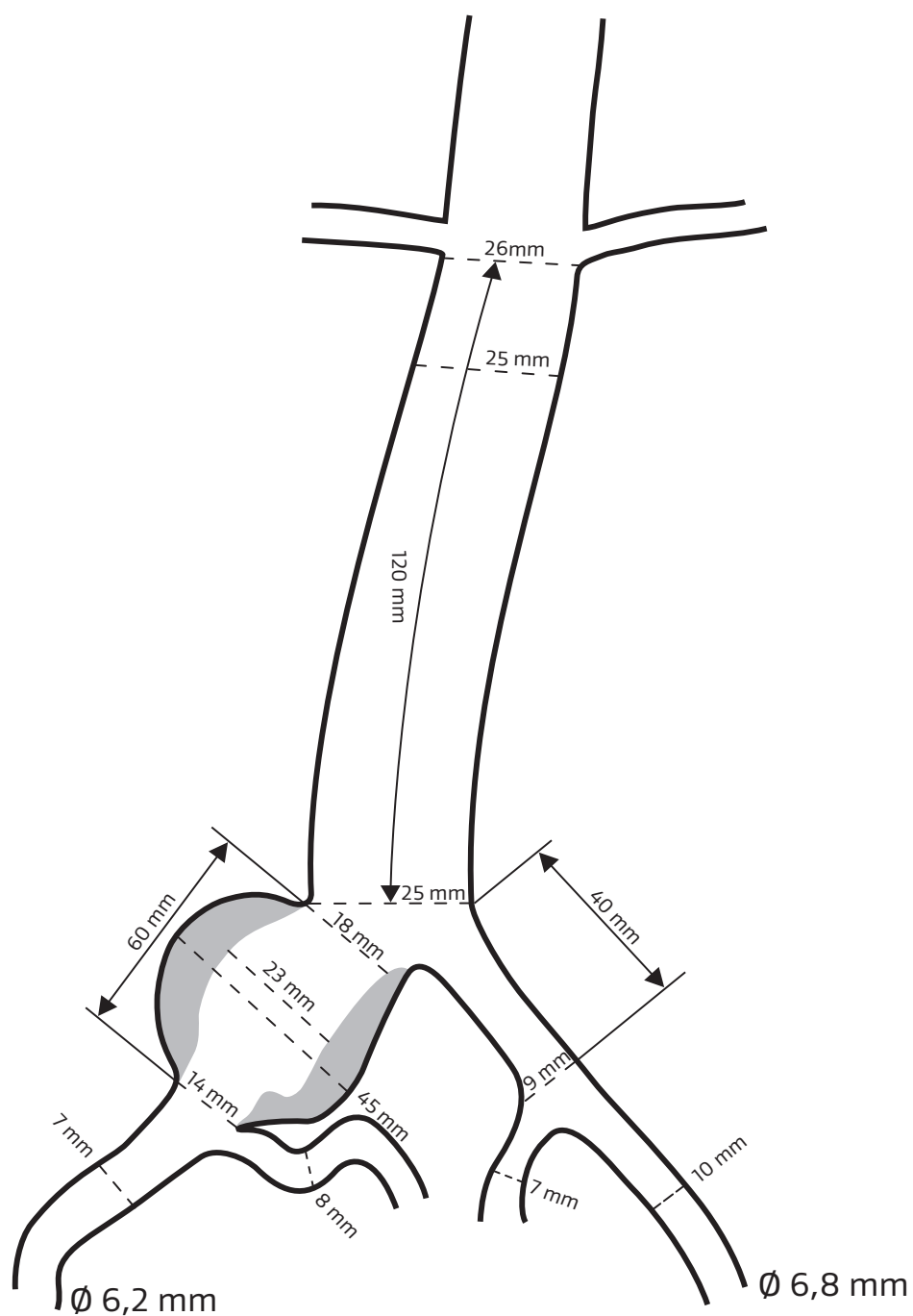


PLANEJAMENTO DE CASO 6

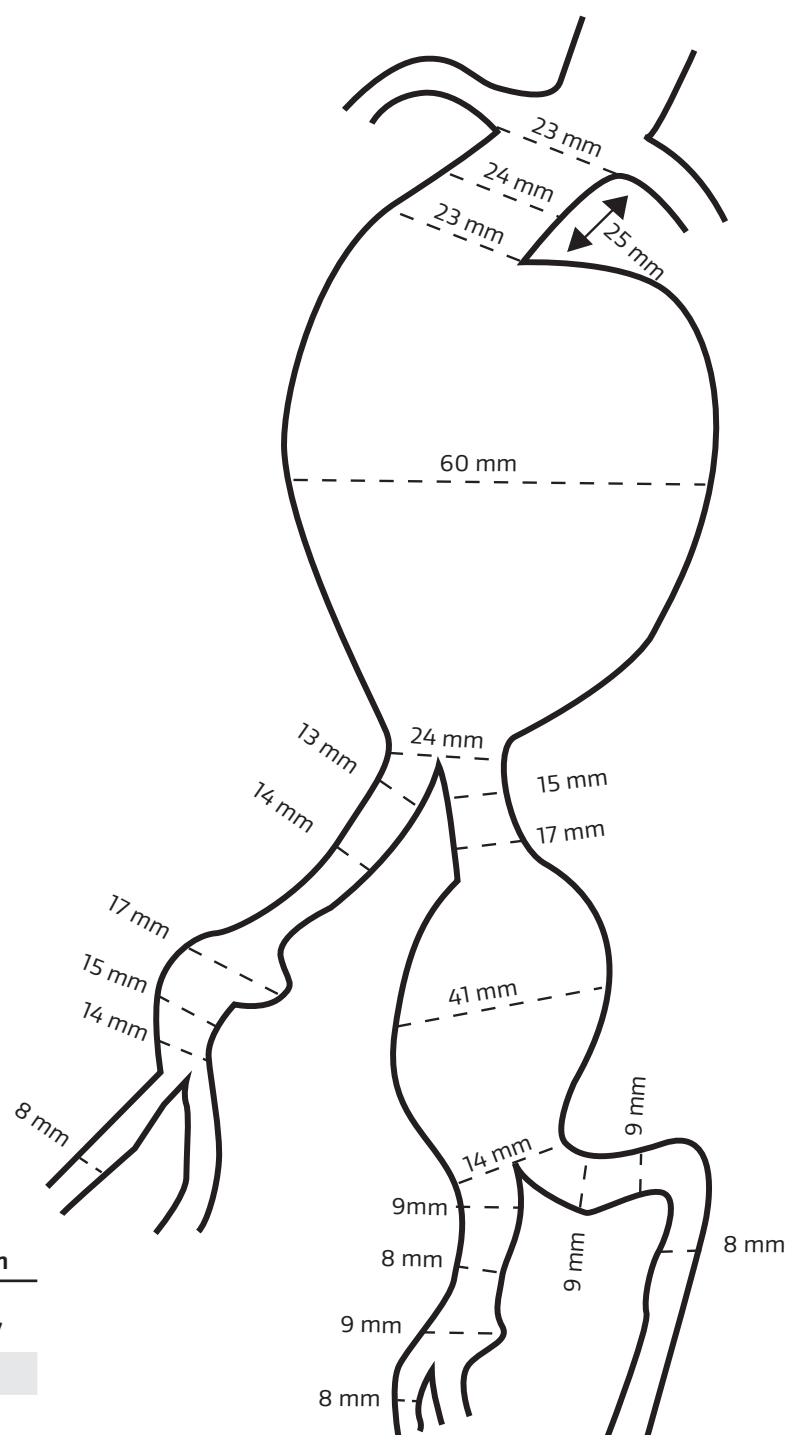

Comprimentos	mm
Da renal mais baixa até a bifurcação aórtica	107
Ilíaca comum esquerda	77
Ilíaca comum direita	55

PLANEJAMENTO DE CASO 7

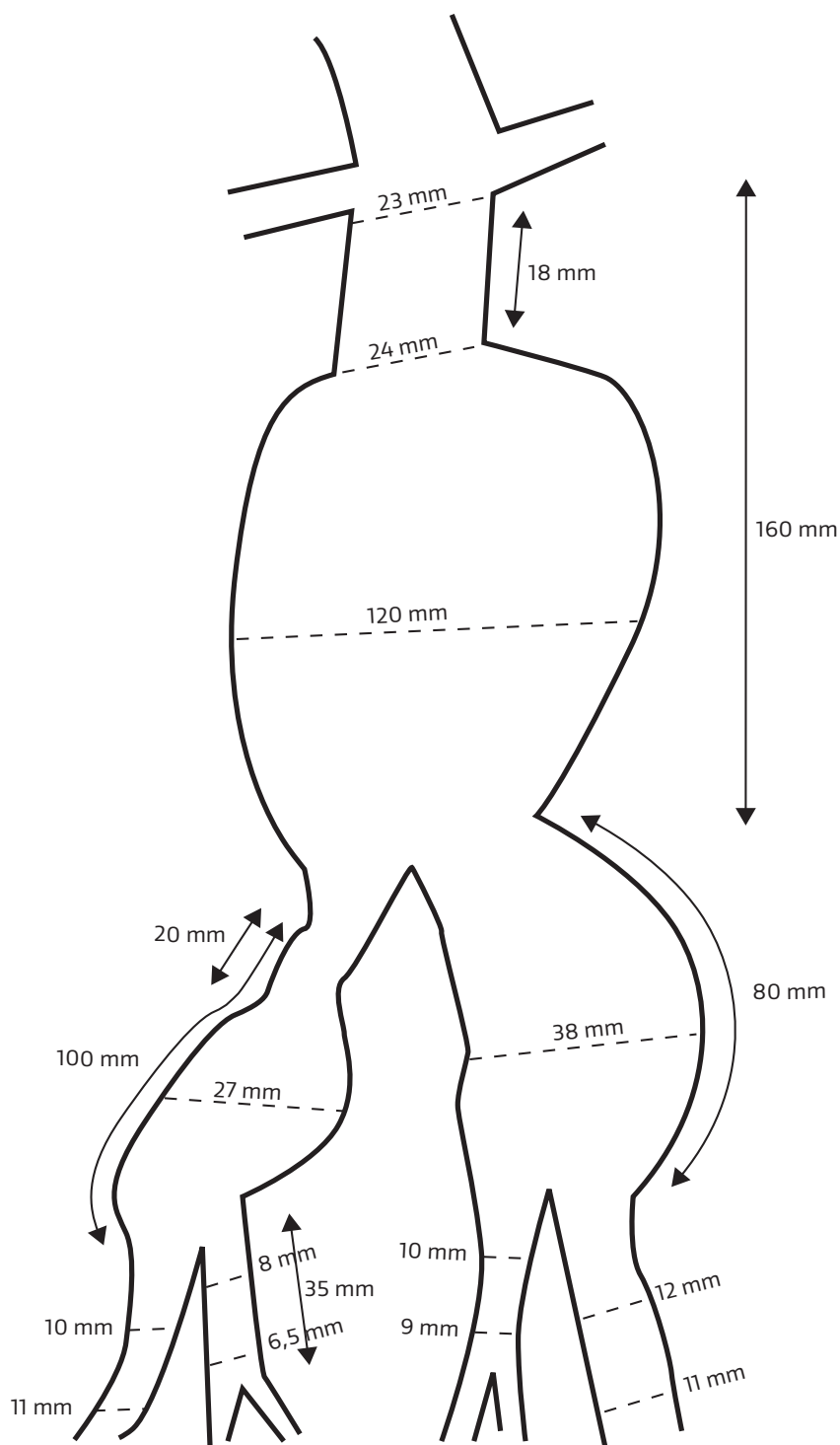

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVE DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 1

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado direito

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 12 mm x 10 cm (CEB231210K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (HGB161407K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 10 ou 12 cm (PLC271000K ou PLC271200K)

Dispositivo do tronco: Lado esquerdo

- 28,5 mm x 14,5 mm x 16 cm (esquerdo) (RLT281416K)
- Possível extensão
 - 16 mm x 14,5 mm x 7 cm (PLL161407K)

PLANEJAMENTO DE CASO 2

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado direito

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 14,5 mm x 10 cm (CEB231410K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 14,5 mm x 7 cm (proximal) (HGB161407K)
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (distal) (HGB161007K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 10 ou 12 cm (PLC271000K ou PLC271200K)
 - Devido à rápida expansão do diâmetro na ilíaca comum, pode ser discutido o uso de um componente de ponte de 27 mm ou um de 23 mm
 - A recomendação das IFU é que, se o segmento proximal do IBE for implantado em um lúmen de fluxo ilíaco com diâmetro de 17 a 21 mm, seja usado um componente de ponte de 23 mm e, se o diâmetro for > 21 mm, um componente de ponte de 27 mm

Dispositivo do tronco: Lado esquerdo

- 31 mm x 14,5 mm x 17 cm (RLT311417K)
- Extensão
 - 16 mm x 12 mm x 7 cm (PLL161207K)

As recomendações de dispositivo e tamanho para esses exercícios são exemplos ilustrativos baseados no guia de tamanhos da [GORE® EXCLUDER® Infrarenal Device Family] nas *Instruções de Uso* (IFU). Os casos reais envolvem variáveis que podem afetar a seleção de dispositivo e tamanho do profissional da saúde (HCP). Os profissionais da saúde continuam sendo os responsáveis por tomar decisões sobre o atendimento ao paciente e o uso de tecnologias médicas.

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVE DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 3

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado direito

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 10 mm x 10 cm (CEB231010K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 14,5 mm x 7 cm (HGB161407K)
- Componente de ponte
 - 23 mm x 10 ou 12 cm (PLC231000K ou PLC231200K)

Dispositivo do tronco: Lado esquerdo

- 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm
 - Extensão com 18 mm x 9,5 cm ou 20 mm x 9,5 cm (a região cônica em um 23 tem 5 cm, o que significa que você teria que colocar 1 cm da parte cônica (*taper*) dentro do ramo ipsilateral. O de 20 mm cabe nos diâmetros de acordo com as instruções de uso e requer apenas 4 cm de *taper* se estendendo a partir do ramo ipsilateral).

PLANEJAMENTO DE CASO 4

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado esquerdo

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 14,5 mm x 10 cm (CEB231410K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (HGB161007K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 14 cm (PLC271400K)

IBE: Lado direito

Dispositivo do tronco: Lado direito

- 31 mm x 14,5 mm x 14 cm (RLT311414K)
- Ilíaca comum
 - 23 mm x 14,5 mm x 10 cm (CEB231410K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (HGB161007K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 10 cm (PLC271000K)

PLANEJAMENTO DE CASOS CHAVE DE RESPOSTA

PLANEJAMENTO DE CASO 5

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado direito

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 10 mm x 10 cm (CEB231010K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (HGB161007K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 12 cm (PLC271200K)

Dispositivo do tronco: Lado esquerdo

- 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (RLT281412K)
- Extensão
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (PLL161007K)

PLANEJAMENTO DE CASO 6

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado esquerdo

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 10 mm x 10 cm (CEB231210K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (HGB161007K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 12 cm (PLC271200K)

Dispositivo do tronco: Lado direito

- 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (RLT281412K)
- Extensão
 - 18 mm x 10 cm (PLC181000K)

PLANEJAMENTO DE CASO 7

GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis

IBE: Lado esquerdo

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 14,5 mm x 10 cm (CEB231210K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10/12 mm x 7 cm (HGB16(10/12)07K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 14 cm + 14,5 mm x 7 cm
(PLC271400K + PLL161407K)

IBE: Lado direito

- Ilíaca comum
 - 23 mm x 12 mm x 10 cm (CEB231210K)
- Ilíaca interna
 - 16 mm x 10 mm x 7 cm (HGB161007K)
- Componente de ponte
 - 27 mm x 12 cm (PLC271200K)

Dispositivo do tronco: Lado direito

- 28,5 mm x 14,5 mm x 12 cm (RLT281412K)

NOTAS

 Consulte as Instruções de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* no Web site eifu.goremedical.com para uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados onde este produto está disponível. Rx Only

Nome comercial: GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath. Número do registro na ANVISA: 80067930039

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930038

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930047

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930040

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são de propriedade de uma empresa do grupo Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs "*Together, improving life*" são marcas registradas de uma empresa da Gore. 26AR1090-PT01 JULHO DE 2026 MAT-0851-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia Pacífico +65 67332882 Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86003 800 437 8181 928 779 2771

