

GORE® VIABAHN® VBX

Balloon Expandable Endoprosthesis



AGORA
compatível com

6Fr

MAIOR
VERSATILIDADE

TABELA DE CONFORMIDADE DOS DISPOSITIVOS

Together, improving life




Este recurso contém informações extraídas dos rótulos na embalagem da GORE® VIABAHN® VBX Balloon Expandable Endoprosthesis packaging labels e pode ser útil para auxiliar na seleção e na implantação do dispositivo. Para obter informações completas sobre a seleção e a implantação do dispositivo, consulte os rótulos da embalagem do produto e as *Instruções de Uso*.

Os profissionais de saúde qualificados continuam sendo os responsáveis por tomar as decisões médicas adequadas e selecionar as tecnologias médicas, com base em sua formação prévia e experiência profissional. O profissional de saúde também é responsável por avaliar as necessidades individuais e os melhores interesses do paciente.

Índice

5 mm x 15 mm (6 Fr)	3	7 mm x 19 mm (6 Fr)	16	9 mm x 29 mm (7 Fr)	29
5 mm x 19 mm (6 Fr)	4	7 mm x 29 mm (6 Fr)	17	9 mm x 39 mm (7 Fr)	30
5 mm x 29 mm (6 Fr)	5	7 mm x 39 mm (6 Fr)	18	9 mm x 59 mm (7 Fr)	31
5 mm x 39 mm (6 Fr)	6	7 mm x 59 mm (6 Fr)	19	9 mm x 79 mm (7 Fr)	32
5 mm x 59 mm (6 Fr)	7	7 mm x 79 mm (6 Fr)	20	10 mm x 29 mm (8 Fr)	33
5 mm x 79 mm (6 Fr)	8	8 mm x 29 mm (7 Fr)	21	10 mm x 39 mm (8 Fr)	34
6 mm x 15 mm (6 Fr)	9	8 mm x 39 mm (7 Fr)	22	10 mm x 59 mm (8 Fr)	35
6 mm x 19 mm (6 Fr)	10	8 mm x 59 mm (7 Fr)	23	10 mm x 79 mm (8 Fr)	36
6 mm x 29 mm (6 Fr)	11	8 mm x 79 mm (7 Fr)	24	11 mm x 29 mm (8 Fr)	37
6 mm x 39 mm (6 Fr)	12	8L mm x 29 mm (7 Fr)	25	11 mm x 39 mm (8 Fr)	38
6 mm x 59 mm (6 Fr)	13	8L mm x 39 mm (7 Fr)	26	11 mm x 59 mm (8 Fr)	39
6 mm x 79 mm (6 Fr)	14	8L mm x 59 mm (8 Fr)	27	11 mm x 79 mm (8 Fr)	40
7 mm x 15 mm (6 Fr)	15	8L mm x 79 mm (8 Fr)	28		

5 mm x 15 mm (6 Fr)

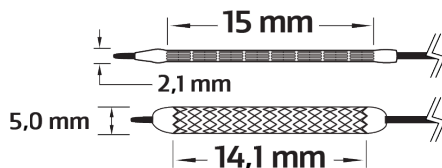

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
5 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

5 mm x 15 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
7	709	4,3	14,5
8	811	4,4	14,4
9	912	4,5	14,4
10	1013	4,7	14,3
11	1115	4,8	14,3
12	1216	4,9	14,2
NP 13 Pressão nominal	1317	5,0	14,1
14	1419	5,1	14,1
15	1520	5,2	14,0
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	5,3	14,0
17	1723	5,4	13,9
18	1824	5,5	13,8
19	1925	5,5	13,8
20	2027	5,6	13,7
		8,0	10,5

É necessário um segundo balão, não incluído

5 mm x 19 mm (6 Fr)

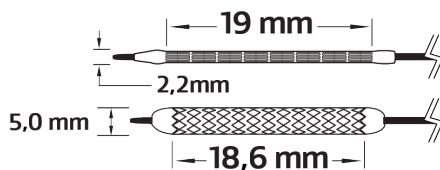

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
5 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

5 mm x 19 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	4,4	18,9
7	709	4,5	18,9
8	811	4,6	18,8
9	912	4,8	18,7
10	1013	4,9	18,7
NP 11 Pressão nominal	1115	5,0	18,6
12	1216	5,1	18,5
13	1317	5,2	18,4
14	1419	5,2	18,4
15	1520	5,3	18,3
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	5,4	18,2
17	1723	5,5	18,2
18	1824	5,6	18,1
19	1925	5,7	18,0
		8,0	13,8

É necessário um segundo balão, não incluído


5 mm x 29 mm (6 Fr)

BX

5 mm x 29 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

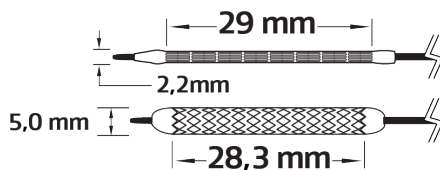

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
5 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
7	709	4,5	28,7
8	811	4,6	28,6
9	912	4,7	28,5
10	1013	4,9	28,5
11	1115	4,9	28,4
NP 12 Pressão nominal	1216	5,0	28,3
13	1317	5,1	28,2
14	1419	5,2	28,2
15	1520	5,3	28,1
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	5,4	28,0
17	1723	5,5	27,9
18	1824	5,6	27,9
19	1925	5,7	27,8
		8,0	22,3

É necessário um segundo balão, não incluído

5 mm x 39 mm (6 Fr)

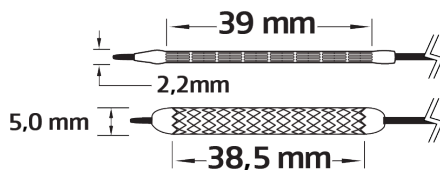

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
5 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

5 mm x 39 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
7	709	4,6	38,9
8	811	4,7	38,8
9	912	4,8	38,7
10	1013	4,9	38,6
NP 11	1115	5,0	38,5
Pressão nominal			
12	1216	5,1	38,5
13	1317	5,2	38,4
14	1419	5,3	38,3
15	1520	5,4	38,2
RBP 16	1621	5,5	38,1
Pressão de ruptura nominal			
17	1723	5,6	38,0
18	1824	5,7	37,9
19	1925	5,8	37,9
		8,0	32,0

É necessário um segundo balão, não incluído

5 mm x 59 mm (6 Fr)

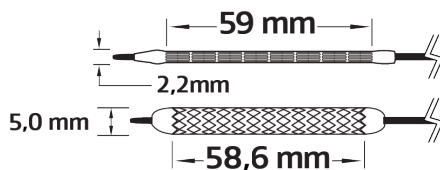

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
5 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

5 mm x 59 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
7	709	4,4	58,9
8	811	4,5	58,8
9	912	4,7	58,8
10	1013	4,8	58,7
11	1115	4,9	58,7
NP 12 Pressão nominal	1216	5,0	58,6
13	1317	5,1	58,6
14	1419	5,2	58,5
15	1520	5,3	58,5
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	5,4	58,4
17	1723	5,5	58,4
18	1824	5,6	58,3
19	1925	5,8	58,3
+		8,0	51,2

É necessário um segundo balão, não incluído

5 mm x 79 mm (6 Fr)

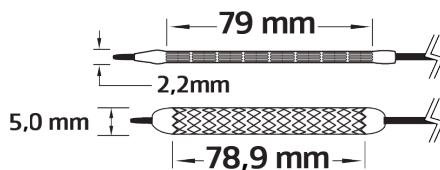

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
5 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

5 mm x 79 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
7	709	4,3	79,0
8	811	4,4	79,0
9	912	4,5	79,0
10	1013	4,7	79,0
11	1115	4,8	79,0
12	1216	4,9	79,0
13	1317	4,9	79,0
NP 14 Pressão nominal	1419	5,0	78,9
15	1520	5,1	78,9
16	1621	5,2	78,9
RBP 17 Pressão de ruptura nominal	1723	5,3	78,9
18	1824	5,4	78,9
19	1925	5,5	78,9
		8,0	72,1

É necessário um segundo balão, não incluído

6 mm x 15 mm (6 Fr)

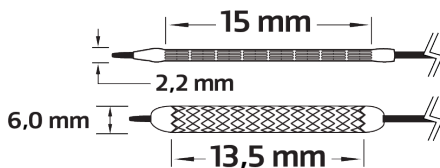

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
6 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

6 mm x 15 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	5,0	14,1
7	709	5,1	14,0
8	811	5,2	14,0
9	912	5,4	13,9
10	1013	5,4	13,9
11	1115	5,5	13,8
12	1216	5,6	13,8
13	1317	5,6	13,7
14	1419	5,7	13,7
15	1520	5,8	13,6
16	1621	5,8	13,6
17	1723	5,9	13,5
NP 18			
Pressão nominal	1824	6,0	13,5
Pressão de ruptura nominal			
19	1925	6,1	13,4
20	2027	6,1	13,4
		8,0	10,5

É necessário um segundo balão, não incluído

6 mm x 19 mm (6 Fr)

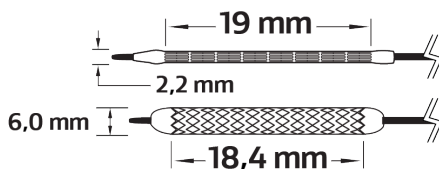

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
6 mm



Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
8 mm

BX

6 mm x 19 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

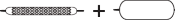Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	5,1	18,9
7	709	5,2	18,9
8	811	5,4	18,8
9	912	5,5	18,8
10	1013	5,6	18,7
11	1115	5,7	18,7
12	1216	5,7	18,6
13	1317	5,8	18,6
14	1419	5,9	18,5
15	1520	5,9	18,4
NP 16 Pressão nominal	1621	 6,0	18,4
RBP 17 Pressão de ruptura nominal	1723	6,1	18,3
18	1824	6,2	18,3
		 8,0	14,6


É necessário um segundo balão, não incluído

6 mm x 29 mm (6 Fr)

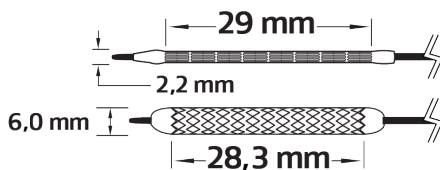

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
6 mm


Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
8 mm

BX

6 mm x 29 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	5,1	28,4
7	709	5,3	28,4
8	811	5,4	28,4
9	912	5,5	28,4
10	1013	5,6	28,4
11	1115	5,7	28,3
12	1216	5,7	28,3
13	1317	5,8	28,3
14	1419	5,9	28,3
NP 15 Pressão nominal	1520	 6,0	28,3
16	1621	6,0	28,3
RBP 17 Pressão de ruptura nominal	1723	 6,1	28,2
18	1824	6,2	28,2
 + 		 8,0	24,3

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído

6 mm x 39 mm (6 Fr)

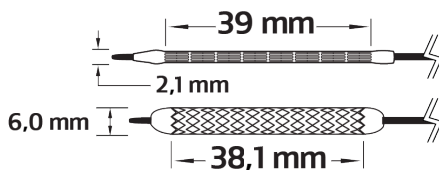

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
6 mm


Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
8 mm

BX

6 mm x 39 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	5,0	38,5
7	709	5,2	38,4
8	811	5,4	38,4
9	912	5,5	38,4
10	1013	5,6	38,3
11	1115	5,7	38,3
12	1216	5,8	38,2
13	1317	5,9	38,2
NP 14 Pressão nominal		 6,0	38,1
15	1520	6,1	38,1
16	1621	6,2	38,1
RBP 17 Pressão de ruptura nominal		 6,3	38,0
18	1824	6,3	38,0
 + 		 8,0	33,3

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído

6 mm x 59 mm (6 Fr)

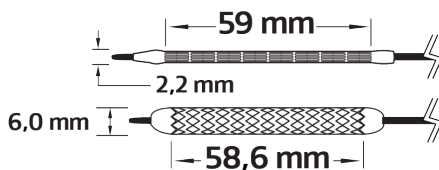

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
6 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
8 mm

BX

6 mm x 59 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	5,1	58,4
7	709	5,3	58,4
8	811	5,4	58,4
9	912	5,6	58,5
10	1013	5,7	58,5
11	1115	5,8	58,5
12	1216	5,8	58,5
13	1317	5,9	58,5
14	1419	5,9	58,6
NP 15 Pressão nominal	1520	6,0	58,6
16	1621	6,1	58,6
RBP 17 Pressão de ruptura nominal	1723	6,1	58,6
18	1824	6,2	58,7
		8,0	52,3

É necessário um segundo balão, não incluído

6 mm x 79 mm (6 Fr)

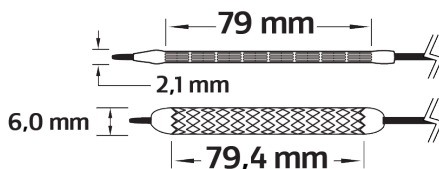

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
6 mm


Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
8 mm

BX

6 mm x 79 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	5,1	78,7
7	709	5,3	78,7
8	811	5,4	78,8
9	912	5,5	78,9
10	1013	5,6	79,0
11	1115	5,7	79,1
12	1216	5,8	79,2
13	1317	5,9	79,3
NP 14 Pressão nominal		 6,0	79,4
15	1520	6,1	79,4
16	1621	6,1	79,5
RBP 17 Pressão de ruptura nominal		 6,2	79,6
18	1824	6,3	79,7
 + 		 8,0	73,6

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído


7 mm x 15 mm (6 Fr)

BX

7 mm x 15 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

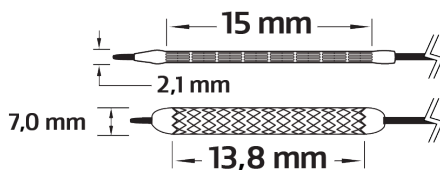

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
7 mm

Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
11 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	6,2	13,9
6	608	6,5	13,8
7	709	6,7	13,8
8	811	6,9	13,8
NP 9 Pressão nominal	912	7,0	13,8
10	1013	7,1	13,7
RBP 11 Pressão de ruptura nominal	1115	7,2	13,7
12	1216	7,4	13,7
13	1317	7,5	13,7
+		11,0	9,5

É necessário um segundo balão, não incluído


7 mm x 19 mm (6 Fr)

BX

7 mm x 19 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

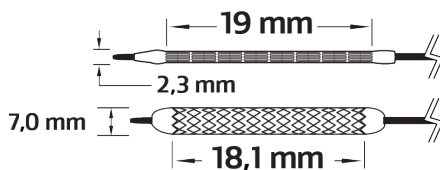

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
7 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
11 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	6,4	18,5
6	608	6,7	18,3
7	709	6,9	18,2
NP 8 Pressão nominal	811	7,0	18,1
9	912	7,2	18,0
10	1013	7,3	17,9
RBP 11 Pressão de ruptura nominal	1115	7,4	17,7
12	1216	7,5	17,6
13	1317	7,6	17,5
+		11.0	12.6

É necessário um segundo balão, não incluído

7 mm x 29 mm (6 Fr)

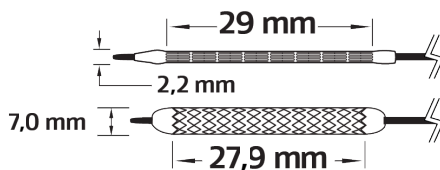

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia

Bainha introdutora
6 Fr

Diâmetro nominal do stent
7 mm

Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
11 mm

BX

7 mm x 29 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	6,3	28,1
6	608	6,6	28,0
7	709	6,8	27,9
NP 8 Pressão nominal	811	7,0	27,9
9	912	7,1	27,8
10	1013	7,3	27,7
RBP 11 Pressão de ruptura nominal	1115	7,4	27,7
12	1216	7,5	27,6
13	1317	7,7	27,6
+		11,0	19,4

É necessário um segundo balão, não incluído

7 mm x 39 mm (6 Fr)

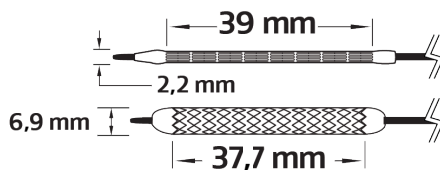

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
7 mm


Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
11 mm

BX

7 mm x 39 mm


6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	6,5	37,8
7	709	6,8	37,7
NP 8 Pressão nominal	811	 6,9	37,7
9	912	7,1	37,6
10	1013	7,2	37,5
RBP 11 Pressão de ruptura nominal	1115	7,4	37,4
12	1216	7,5	37,3
13	1317	7,7	37,2
 + 		 11,0	26,6

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído

7 mm x 59 mm (6 Fr)

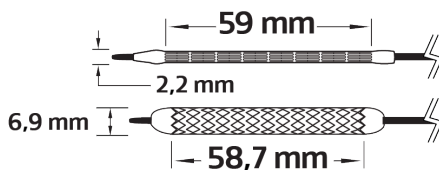

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
7 mm



Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
11 mm

BX

7 mm x 59 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

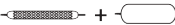Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	6,7	58,7
NP 7 Pressão nominal	709	 6,9	58,7
8	811	7,1	58,6
9	912	7,2	58,6
10	1013	7,3	58,6
RBP 11 Pressão de ruptura nominal	1115	7,4	58,5
12	1216	7,5	58,5
13	1317	7,7	58,5
 + 		 11,0	46,9

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído


7 mm x 79 mm (6 Fr)

BX

7 mm x 79 mm

6 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

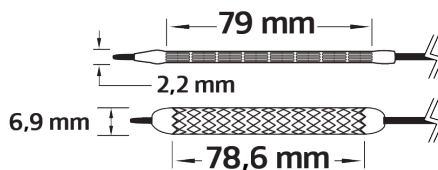

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
6 Fr


Diâmetro nominal do stent
7 mm


Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
11 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	6,5	78,7
7	709	6,7	78,7
NP 8 Pressão nominal	811	 6,9	78,6
9	912	7,1	78,6
10	1013	7,2	78,5
RBP 11 Pressão de ruptura nominal	1115	 7,4	78,5
12	1216	7,5	78,4
13	1317	7,7	78,4
 + 		 11,0	68,1

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído


8 mm x 29 mm (7 Fr)

BX

8 mm x 29 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

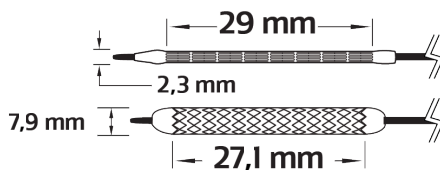

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
7 Fr


Diâmetro nominal do stent
8 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
11 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	7,2	27,2
7	709	7,4	27,2
8	811	7,5	27,2
9	912	7,7	27,2
10	1013	7,8	27,1
NP 11 Pressão nominal	1115	7,9	27,1
12	1216	8,1	27,1
13	1317	8,2	27,1
14	1419	8,3	27,0
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	8,4	27,0
16	1621	8,5	27,0
+		11,0	23,7

É necessário um segundo balão, não incluído

8 mm x 39 mm (7 Fr)

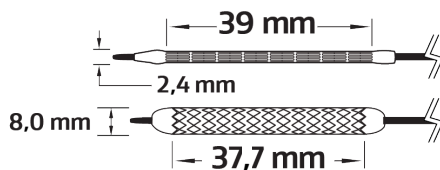

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
7 Fr

Diâmetro nominal do stent
8 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
11 mm

BX

8 mm x 39 mm


7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	7,2	38,0
7	709	7,4	37,9
8	811	7,5	37,9
9	912	7,7	37,8
10	1013	7,8	37,8
11	1115	7,9	37,7
NP 12 Pressão nominal	1216	8,0	37,7
13	1317	8,2	37,6
14	1419	8,3	37,5
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	8,4	37,5
16	1621	8,6	37,4
+		11,0	30,0

+
É necessário um segundo balão, não incluído

8 mm x 59 mm (7 Fr)

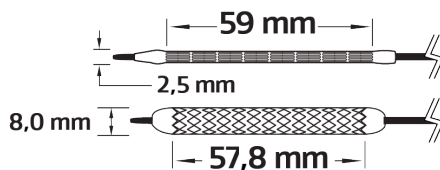

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
7 Fr

Diâmetro nominal do stent
8 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
11 mm

BX

8 mm x 59 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	7,1	58,1
7	709	7,3	58,0
8	811	7,5	58,0
9	912	7,6	58,0
10	1013	7,8	57,9
11	1115	7,9	57,9
NP 12 Pressão nominal	1216	8,0	57,8
13	1317	8,1	57,8
14	1419	8,3	57,7
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	8,4	57,7
16	1621	8,5	57,7
+		11,0	47,3

É necessário um segundo balão, não incluído


8 mm x 79 mm (7 Fr)

BX

8 mm x 79 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

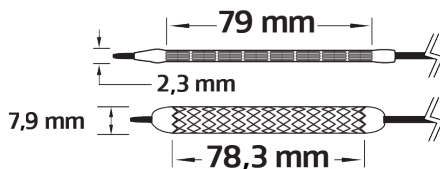

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
7 Fr


Diâmetro nominal do stent
8 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
11 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	6,9	77,8
7	709	7,1	77,9
8	811	7,3	77,9
9	912	7,5	78,0
10	1013	7,6	78,1
11	1115	7,8	78,2
NP 12 Pressão nominal	1216	7,9	78,3
13	1317	8,1	78,4
14	1419	8,3	78,4
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	8,4	78,5
16	1621	8,6	78,6
+		11.0	69,6

É necessário um segundo balão, não incluído

8L mm x 29 mm (7 Fr)

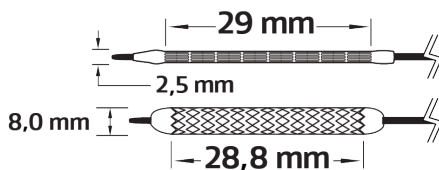

0,035"

Compatibilidade com
fio-guia


Bainha introdutora
7 Fr


Diâmetro nominal do stent
8 mm


Diâmetro máximo
do stent pós-dilatação
16 mm

BX

8 mm x 29 mm


7 Fr

GRANDE EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	6,9	29,1
7	709	7,0	29,0
8	811	7,2	29,0
9	912	7,4	28,9
10	1013	7,6	28,9
11	1115	7,8	28,9
NP 12 Pressão nominal	1216	 8,0	28,8
13	1317	8,1	28,8
14	1419	8,3	28,7
15	1520	8,4	28,7
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	8,6	28,7
17	1723	8,7	28,6
 + 		 16,0	21,8

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído

8L mm x 39 mm (7 Fr)

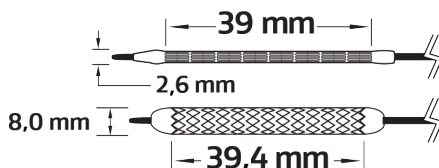

0,035"

Compatibilidade com fio-guia


Bainha introdutora
7 Fr


Diâmetro nominal do stent
8 mm


Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
16 mm

BX

8 mm x 39 mm

7 Fr

GRANDE EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	6,9	39,3
7	709	7,1	39,3
8	811	7,3	39,3
9	912	7,5	39,3
10	1013	7,7	39,4
11	1115	7,9	39,4
NP 12 Pressão nominal	1216	 8,0	39,4
13	1317	8,1	39,4
14	1419	8,3	39,5
15	1520	8,4	39,5
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	8,5	39,5
17	1723	8,7	39,6
 + 		 16,0	26,8

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído


8L mm x 59 mm (8 Fr)

BX

8 mm x 59 mm

8 Fr

GRANDE EXPANSÍVEL COM BALÃO

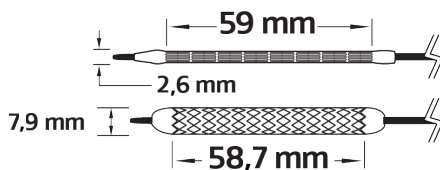

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
8 Fr


Diâmetro nominal do stent
8 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
16 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	7,0	59,1
7	709	7,1	59,0
8	811	7,3	58,9
9	912	7,5	58,9
10	1013	7,7	58,8
NP 11 Pressão nominal	1115	7,9	58,7
12	1216	8,1	58,7
13	1317	8,2	58,6
14	1419	8,4	58,5
15	1520	8,6	58,4
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	8,7	58,4
17	1723	8,9	58,3
+		16,0	44,1

É necessário um segundo balão, não incluído

8L mm x 79 mm (8 Fr)

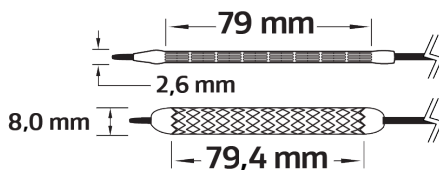

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
8 Fr

Diâmetro nominal do stent
8 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
16 mm

BX

8 mm x 79 mm

8 Fr

GRANDE EXPANSÍVEL COM BALÃO

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	7,0	79,0
7	709	7,1	79,1
8	811	7,3	79,1
9	912	7,5	79,2
10	1013	7,7	79,3
11	1115	7,9	79,3
NP 12 Pressão nominal	1216	8,0	79,4
13	1317	8,2	79,5
14	1419	8,3	79,5
15	1520	8,5	79,6
RBP 16 Pressão de ruptura nominal	1621	8,6	79,7
17	1723	8,7	79,8
18	1824	8,9	79,8
19	1925	9,0	79,9
+		16,0	58,6

É necessário um segundo balão, não incluído


9 mm x 29 mm (7 Fr)

BX

9 mm x 29 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

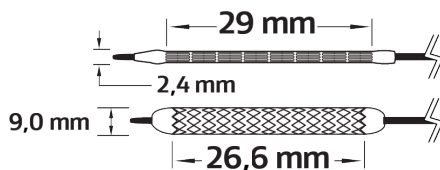

0,035"

Compatibilidade com fio-guia


Bainha introdutora
7 Fr


Diâmetro nominal do stent
9 mm


Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
13 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	7,6	27,7
6	608	7,9	27,5
7	709	8,1	27,4
8	811	8,3	27,3
9	912	8,5	27,1
10	1013	8,7	27,0
11	1115	8,8	26,9
12	1216	8,9	26,8
NP 13 Pressão nominal	1317	 9,0	26,6
14	1419	9,2	26,5
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	9,3	26,4
16	1621	9,4	26,3
 13,0		13,0	20,4

 + 
É necessário um segundo balão, não incluído


9 mm x 39 mm (7 Fr)

BX

9 mm x 39 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

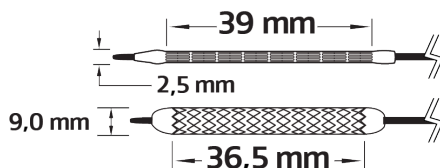


0,035"


Compatibilidade com fio-guia


Bainha introdutora
7 Fr


Diâmetro nominal do stent
9 mm


Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
13 mm

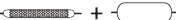Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	7,6	37,8
6	608	8,0	37,6
7	709	8,2	37,4
8	811	8,4	37,2
9	912	8,6	37,0
10	1013	8,7	36,9
11	1115	8,9	36,7
NP 12 Pressão nominal	1216	9,0	36,5
13	1317	9,2	36,3
14	1419	9,3	36,2
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	9,5	36,0
16	1621	9,6	35,8
		13,0	23,2

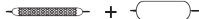
É necessário um segundo balão, não incluído


9 mm x 59 mm (7 Fr)

BX

9 mm x 59 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

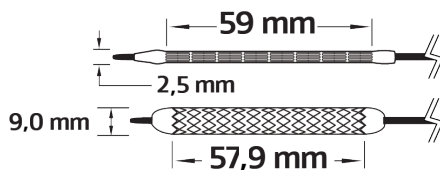

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
7 Fr

Diâmetro nominal do stent
9 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
13 mm

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	7,9	58,2
7	709	8,1	58,1
8	811	8,4	58,1
9	912	8,6	58,0
10	1013	8,8	58,0
NP 11 Pressão nominal	1115	9,0	57,9
12	1216	9,2	57,9
13	1317	9,3	57,8
14	1419	9,5	57,8
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	9,6	57,7
16	1621	9,7	57,7
		13,0	38,1

É necessário um segundo balão, não incluído


9 mm x 79 mm (7 Fr)

BX

9 mm x 79 mm

7 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

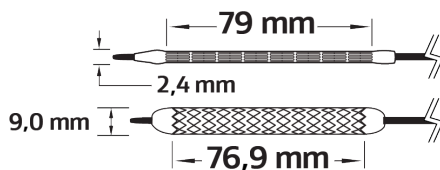

0,035"

Compatibilidade com fio-guia

Bainha introdutora
7 Fr

Diâmetro nominal do stent
9 mm

Diâmetro máximo do stent pós-dilatação
13 mm


Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	8,0	77,2
7	709	8,3	77,2
8	811	8,5	77,1
9	912	8,7	77,0
10	1013	8,8	76,9
NP 11 Pressão nominal	1115	9,0	76,9
12	1216	9,1	76,8
13	1317	9,3	76,7
14	1419	9,4	76,6
RBP 15 Pressão de ruptura nominal	1520	9,6	76,6
16	1621	9,8	76,5
17	1723	9,9	76,4
+		13,0	62,7

É necessário um segundo balão, não incluído

10 mm x 29 mm (8 Fr)

10 mm x 29 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

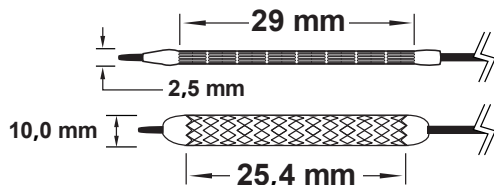


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do
stent pós-dilatação

13 mm

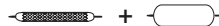


É necessário um segundo
balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	8,7	25,7
6	608	9,0	25,6
7	709	9,3	25,6
8	810	9,6	25,5
9	912	9,8	25,4
NP 10 Pressão nominal	1013	10,0	25,4
11	1114	10,1	25,3
12	1216	10,2	25,2
RBP 13 Pressão de ruptura nominal	1317	10,4	25,2
14	1418	10,5	25,1
15	1520	10,6	25,0
16	1621	10,7	25,0
		13,0	19,1

10 mm x 39 mm (8 Fr)

10 mm x 39 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

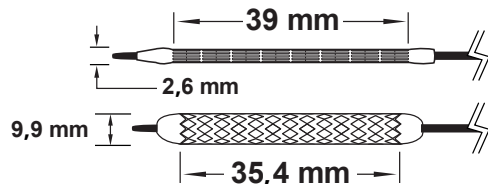

0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do stent pós-dilatação

13 mm




É necessário um segundo balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
6	608	8,8	35,7
7	709	9,1	35,6
8	810	9,4	35,6
9	912	9,6	35,5
10	1013	9,8	35,5
NP 11 Pressão nominal	1114	9,9	35,4
12	1216	10,1	35,4
RBP 13 Pressão de ruptura nominal	1317	10,2	35,3
14	1418	10,3	35,3
15	1520	10,4	35,2
16	1621	10,5	35,2
		13,0	31,1

10 mm x 59 mm (8 Fr)

10 mm x 59 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

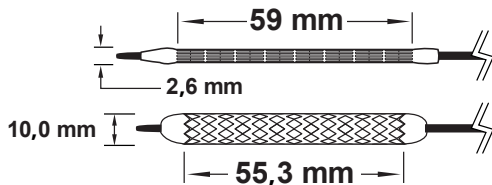


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do stent pós-dilatação

13 mm

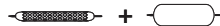


É necessário um segundo balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	8,6	55,5
6	608	8,9	55,4
7	709	9,2	55,4
8	810	9,4	55,4
9	912	9,7	55,3
10	1013	9,9	55,3
NP 11 Pressão nominal	1114	10,0	55,3
12	1216	10,1	55,3
RBP 13 Pressão de ruptura nominal	1317	10,3	55,2
14	1418	10,4	55,2
15	1520	10,5	55,2
16	1621	10,6	55,1
		13,0	44,6

10 mm x 79 mm (8 Fr)

10 mm x 79 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

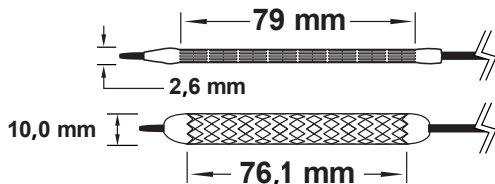


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do stent pós-dilatação

13 mm

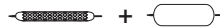


É necessário um segundo balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	8,6	75,7
6	608	8,9	75,8
7	709	9,2	75,8
8	810	9,5	75,9
9	912	9,7	76,0
10	1013	9,8	76,0
NP 11	1114	10,0	76,1
Pressão nominal			
12	1216	10,1	76,2
RBP 13	1317	10,3	76,2
Pressão de ruptura nominal			
14	1418	10,5	76,3
15	1520	10,7	76,3
16	1621	10,9	76,4
		13,0	68,4

11 mm x 29 mm (8 Fr)

11 mm x 29 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

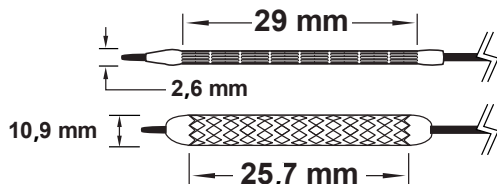


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do stent pós-dilatação

16 mm

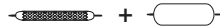


É necessário um segundo balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	9,0	26,6
6	608	9,5	26,4
7	709	10,0	26,2
8	810	10,3	26,1
9	912	10,7	25,9
NP 10 Pressão nominal	1013	10,9	25,7
11	1114	11,2	25,6
RBP 12 Pressão de ruptura nominal	1216	11,4	25,4
13	1317	11,6	25,2
14	1418	11,8	25,1
15	1520	12,0	24,9
		16,0	17,8

11 mm x 39 mm (8 Fr)

11 mm x 39 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

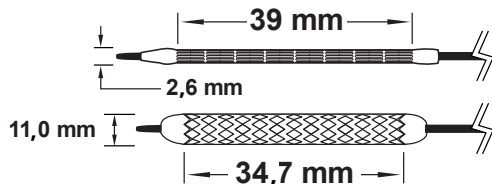


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do
stent pós-dilatação

16* mm

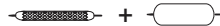


É necessário um segundo
balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	9,4	35,5
6	608	9,7	35,4
7	709	10,1	35,2
8	810	10,4	35,1
9	912	10,6	35,0
10	1013	10,9	34,9
NP 11 Pressão nominal	1114	11,0	34,7
RBP 12 Pressão de ruptura nominal	1216	11,2	34,6
13	1317	11,4	34,5
14	1418	11,6	34,3
15	1520	11,8	34,2
		16,0	25,8

11 mm x 59 mm (8 Fr)

11 mm x 59 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

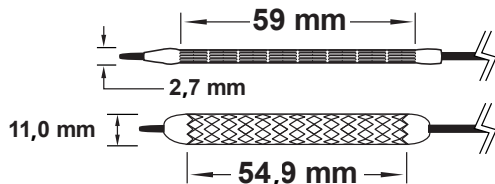


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do
stent pós-dilatação

16* mm

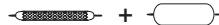


É necessário um segundo
balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	9,5	55,7
6	608	9,9	55,6
7	709	10,2	55,4
8	810	10,6	55,2
9	912	10,8	55,1
NP 10 Pressão nominal	1013	11,0	54,9
11	1114	11,2	54,7
RBP 12 Pressão de ruptura nominal	1216	11,4	54,5
13	1317	11,6	54,4
14	1418	11,8	54,2
15	1520	12,0	54,0
		16,0	42,8

11 mm x 79 mm (8 Fr)

11 mm x 79 mm 8 Fr

EXPANSÍVEL COM BALÃO

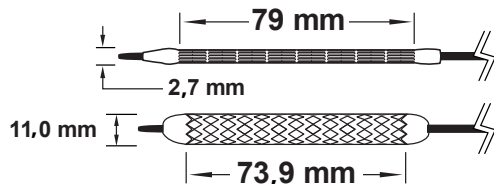


0,035"

Compatibilidade com o fio-guia



Diâmetro máximo do
stent pós-dilatação

16* mm

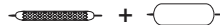

É necessário um segundo
balão, não incluído

Pressão ao insuflar		Diâmetro interior final do stent	Comprimento do stent
atm	kPa	mm	mm
5	507	9,5	74,3
6	608	9,9	74,2
7	709	10,2	74,1
8	810	10,5	74,0
9	912	10,8	74,0
NP 10 Pressão nominal	1013	11,0	73,9
11	1114	11,3	73,8
RBP 12 Pressão de ruptura nominal	1216	11,5	73,7
13	1317	11,8	73,7
14	1418	12,0	73,6
15	1520	12,3	73,5
		16,0	60,6



Consulte as Instruções de Uso
eifu.goremedical.com

Consulte nas *Instruções de Uso* do Web site eifu.goremedical.com uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados onde este produto está disponível. Rx Only

Nome comercial: GORE® VIABAHN® VBX Balloon Expandable Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930049.

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas comerciais de um membro do grupo de empresas afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs "*Together, improving life*" são marcas registradas de uma empresa do grupo Gore.

26PL1146-PT01 JUNHO DE 2026 MAT-1025-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 **Austrália/Nova Zelândia** 1800 680 424 **Europa** 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

