



SEQUÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO

1

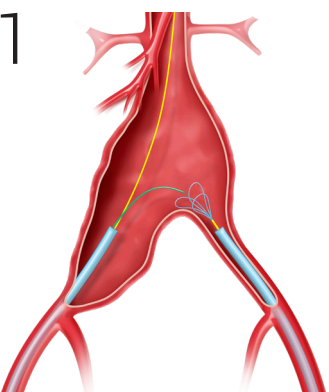


Posicionar as bainhas e o fio-guia por cima e por baixo, utilizando a técnica de laço.

2

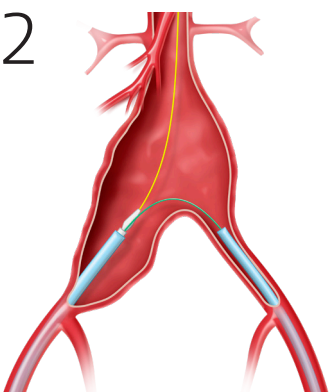


Avance o Componente do Ramo Ilíaco sobre ambos os fios no lado de tratamento com a GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis.

3

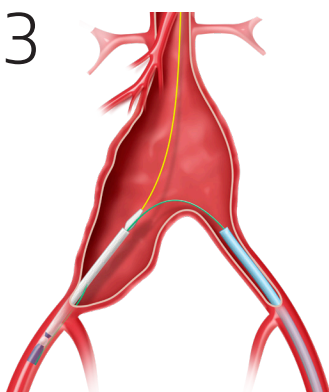


Retire a bainha por baixo da GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis e alinhe o anel marcador radiopaco acima do óstio da artéria ilíaca interna.

4

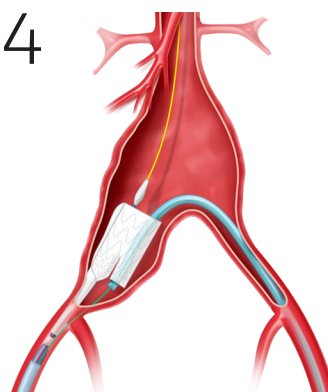


Libere o Componente do Ramo Ilíaco (puxe o botão de liberação externo branco) e avance a bainha flexível de 12 Fr x 45 cm sobre a bifurcação e para dentro do portal da artéria ilíaca interna.

5

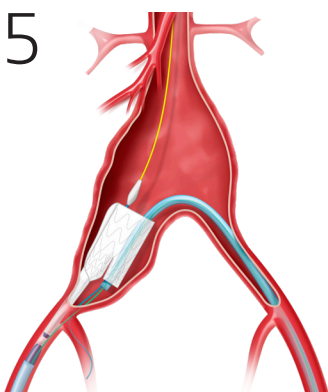


Canule a artéria ilíaca interna com o terceiro fio-guia. O Componente do Ramo Ilíaco parcialmente liberado pode ser reposicionado: A) Girando-o até 90° em qualquer direção, ou B) Movendo-o distalmente, para facilitar o acesso à artéria ilíaca interna.

6

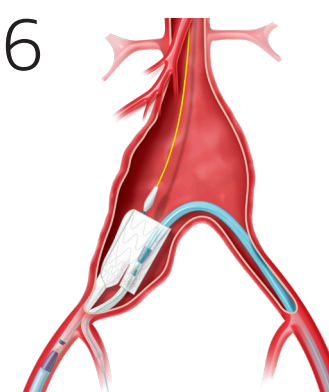


Avance o Componente Ilíaco Interno e alinhe o marcador radiopaco curto do Componente Ilíaco Interno com o marcador radiopaco longo do Componente do Ramo Ilíaco.

7

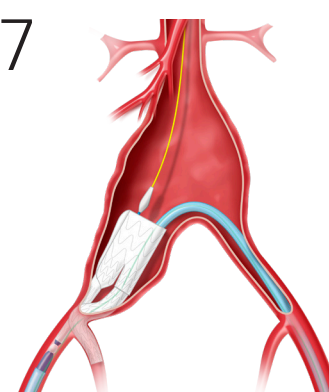


Libere o Componente Ilíaco Interno e balone o *overlap* com o Componente do Ramo Ilíaco, assentando na artéria ilíaca interna. Remova o fio-guia *up-and-over*.

8

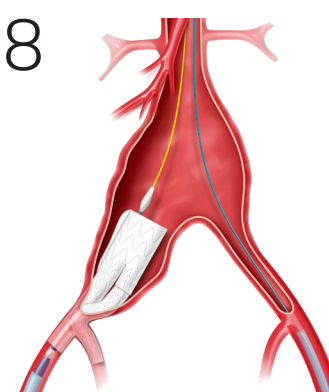


Libere o Ramo Ilíaco Externo do componente do Ramo Ilíaco (puxe o botão de liberação interno cinza).

9

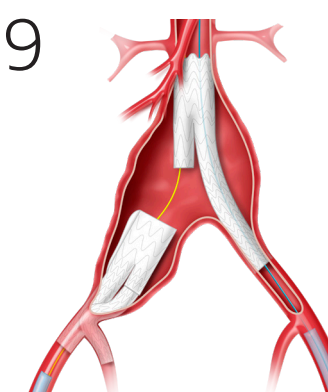


Troque a bainha flexível de 12 Fr por uma bainha de 18 Fr. Avance e libere a endoprótese do tronco-ramo ipsilateral do dispositivo GORE® EXCLUDER®.

10

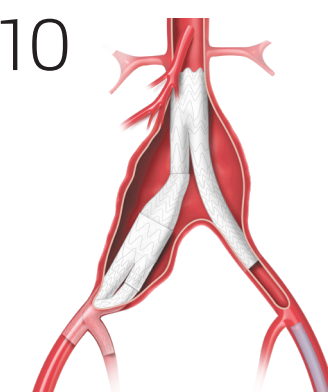

Avance e libere o Ramo Contralateral de 23 ou 27 mm de diâmetro como componente de ponte.

IMPLANTAÇÃO POR PASSOS

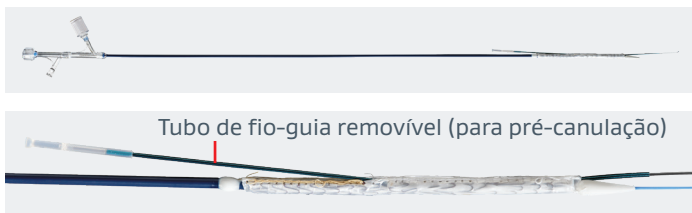

Tubo de fio-guia removível (para pré-canulação)



Fio aórtico
Fio de passagem pré-canulado

Portal de acesso ilíaco interno pré-canulado



Botão de liberação externo

Passo 1: Implantação reposicionável



Botão de liberação interno

Passo 2: Dispositivo totalmente liberado

GORE® EXCLUDER®

Iliac Branch Endoprosthesis

GUIA DE TAMANHOS

Endoprótese do tronco-ramo ipsilateral

Diâmetro aórtico interno (mm)	Diâmetro do extremo aórtico (mm)	Comprimento (mm)	Diâmetro previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro do extremo ilíaco (mm)
19–21	23	12 / 14 / 16 / 18	10–11 / 12–13,5	12 / 14,5
22–23	26	12 / 14 / 16 / 18	10–11 / 12–13,5	12 / 14,5
24–26	28,5	12 / 14 / 16 / 18	10–11 / 12–13,5	12 / 14,5
27–29	31	13 / 15 / 17	12–13,5	14,5
30–32	35	14 / 16 / 18	12–13,5	14,5

Endoprótese do ramo contralateral

Diâmetro da endoprótese ilíaca (mm)	Diâmetro previsto do vaso ilíaco (mm)	Comprimento do ramo contralateral (cm)	Bainha introdutora recomendada (Fr)
12	10–11	10/12/14	12
14,5	12–13,5	10/12/14	12
16	13,5–14,5	9,5/11,5/13,5	12
18	14,5–16,5	9,5/11,5/13,5	12
20	16,5–18,5	9,5/11,5/13,5	12
23	18,4–21,5	10/12/14	14
27	21,5–25	10/12/14	15

Componente do ramo ilíaco

Diâmetro externo previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro do extremo ilíaco (mm)	Comprimento do componente do ramo ilíaco (cm)
6,5–9	10	10
10–11	12	10
12–13,5	14,5	10

Componente ilíaco interno

Diâmetro interno previsto do vaso ilíaco (mm)	Diâmetro do extremo ilíaco (mm)	Comprimento do componente do ramo ilíaco (cm)
6,5–9	10	7
10–11	12	7
12–13,5	14,5	7

Comprimento da renal à ilíaca interna^a

Diâmetro proximal do tronco-endoprótese do ramo ipsilateral (mm)	Comprimento mínimo necessário da renal à ilíaca interna (cm)
23, 26, 28,5	16,5
31	17,5
35	18,5

a. Para usar a Contralateral Leg Endoprosthesis como extensor ilíaco, consulte o Formulário de Seleção do Dispositivo de Medição da GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis: www.goremedical.com/excluder/caseprep/

Dispositivos auxiliares recomendados da Gore

GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath (diâmetro externo):

Número de catálogo	Tamanho da bainha (Fr x cm)
DSFI245	12 x 45
DSFI633	16 x 33
DSFI833	18 x 33

Consulte as Instruções de Uso eifugoremedical.com Consulte nas Instruções de Uso do Web site eifu.goremedical.com uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis aos mercados onde este produto está disponível. Rx only

Nome comercial: GORE® DRYSEAL Flex Introducer Sheath. Número do registro na ANVISA: 80067930039.

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930038.


Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Iliac Branch Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930040.

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais mencionadas são marcas registradas de um membro do grupo de empresas afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs “Together, improving life” são marcas comerciais de uma empresa da Gore. 26AR1085-PT01 AGOSTO DE 2026 MAT-0949-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

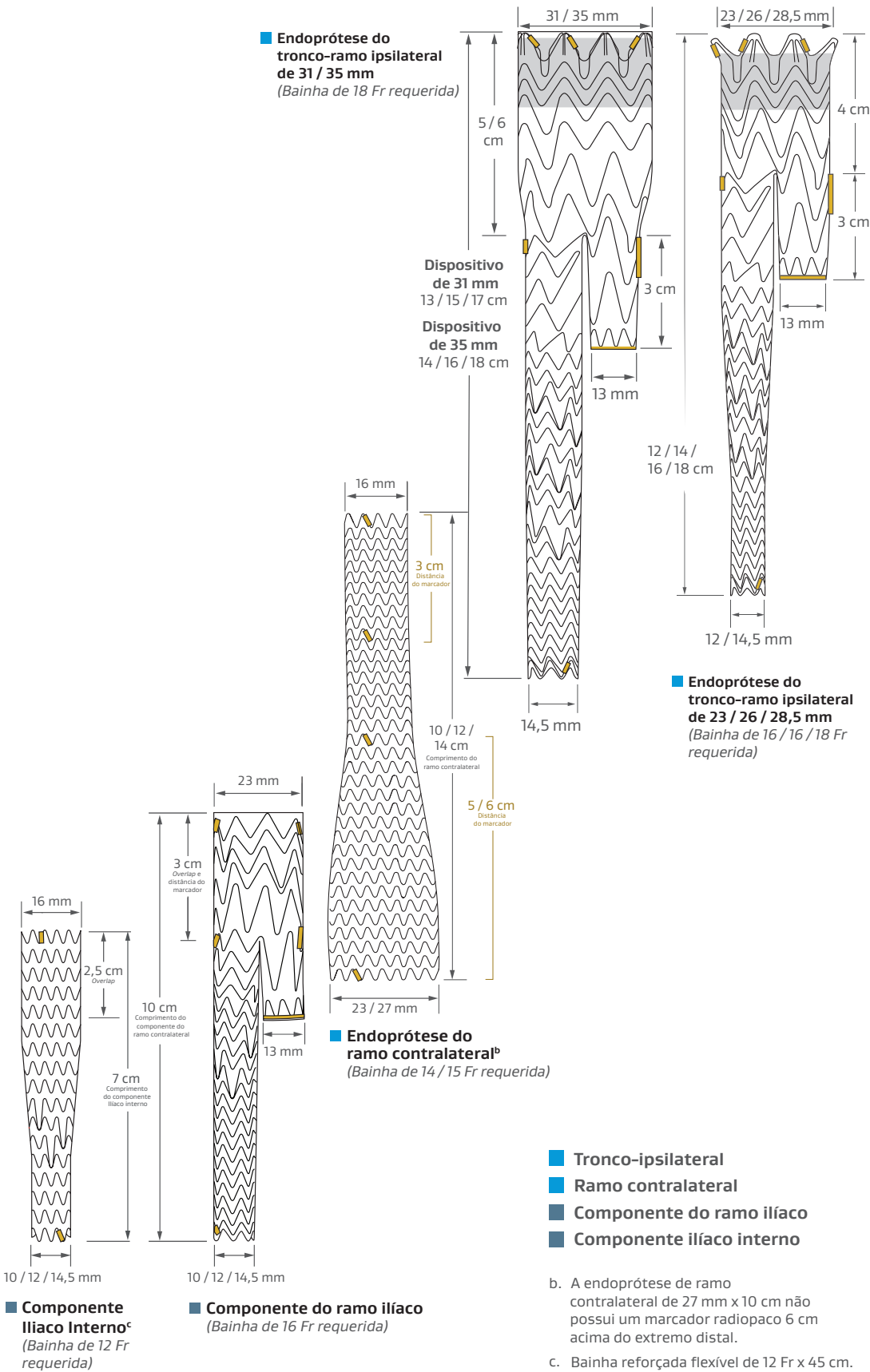

Lista de verificação de acessórios recomendados^d

- 1 — Bainha introdutora de 12 Fr
- 1 — Bainha introdutora de 12, 14, 15, 17 ou 18 Fr^e
- 2 — Fios-guia Superstiff de 0,035", com 145 cm ou mais
- 1 — Cateter marcador pigtail
- 1 — Balão aórtico (tamanho apropriado)
- 1 — Balão PTA de 14 mm x 4 cm
- Vários cateteres e fios para acesso
- Bainha flexível reforçada de 12 Fr x 45 cm
- Kits de cateteres com laço
- Balões PTA de acordo com as recomendações
- GORE® EXCLUDER® Device Aortic Extender
- GORE® EXCLUDER® Device Iliac Extender
- GORE® EXCLUDER® Contralateral Leg Endoprosthesis 12, 14,5, 16, 18, ou 20

d. Lista de verificação mínima.

e. É necessária uma bainha introdutora adicional de 14 ou 15 Fr para usar ramos contralaterais de grande diâmetro.

