

Transforme a complexidade em **confiança**

GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis oferece resultados clínicos comprovados em todas as coortes, incluindo os casos de colo aórtico hostil.

Desenho do estudo clínico pivotal^{1,2}

■ Subestudo de colo curto:

Indivíduos com angulação do colo aórtico AAA $\leq 60^\circ$ e comprimento do colo aórtico infrarrenal ≥ 10 mm.

■ Subestudo de alta angulação do colo:

Indivíduos com angulação do colo aórtico AAA $> 60^\circ$ e $\leq 90^\circ$ e com comprimento do colo aórtico infrarrenal ≥ 10 mm.

Indivíduos por característica do colo		Ângulo do colo	
		$\leq 60^\circ$	$> 60^\circ$ a $\leq 90^\circ$
Comprimento do colo	≥ 15 mm	57	74
	≥ 10 a < 15 mm	23	21

Desfechos após 36 meses

Características do colo aórtico	≥ 15 mm $\leq 60^\circ$	$\geq 10 - < 15$ mm $\leq 60^\circ$	≥ 15 mm $> 60^\circ - \leq 90^\circ$	$\geq 10 - < 15$ mm $> 60^\circ - \leq 90^\circ$	Todos os colos
Total de indivíduos ^a	57	23	74	21	175
Sucesso na técnica do procedimento ^b	100%	100%	97,3%	100%	98,9%
Compressão do dispositivo (kink ou torção)	0%	0%	1,4%	0%	0,6%
Migração	0%	0%	0%	0%	0%
Endoleak tipo I ^c	0%	0%	5,4%	0%	2,3%
Endoleak tipo III	0%	0%	0%	0%	0%
Reintervenção	10,5%	4,3%	17,6%	4,8%	12%
Conversão para reparação	0%	0%	4,1%	0%	1,7%
Ruptura do AAA	0%	0%	1,4%	0%	0,6%
Mortalidade relacionada ao aneurisma	0%	0%	0%	0%	0%
Eventos adversos graves (SAE) relacionados ao dispositivo	0%	0%	4,10%	0%	1,70%
Alteração no diâmetro do saco AAA ^d					
Redução ≥ 5 mm	58,1%	58,3%	42,5%	60,0%	52,4%
Sem alteração	32,6%	25,0%	37,5%	20,0%	32,4%
Aumento ≥ 5 mm	9,3%	16,7%	20,0%	20,0%	15,2%

^a Eventos clínicos e de imagem relatados cumulativamente ao longo de 36 meses (o denominador é qualquer consulta avaliável nos 36 meses).

^b Não foi conseguido o sucesso técnico em 2 indivíduos com *endoleaks* tipo I na angiografia final; eles foram resolvidos antes da primeira imagem pós-operatória.


^c Todos os *endoleaks* tipo I ocorreram antes do período de 12 meses e foram resolvidos sem tratamento.

^d O diâmetro do saco AAA foi avaliado na consulta aos 36 meses.

Confiança baseada no controle, inovação ancorada na confiabilidade

O tratamento da anatomia aórtica complexa exige confiança no seu dispositivo. GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis oferece controle, adaptabilidade e desempenho duradouro sem igual; permitindo que você possa se concentrar nos resultados do paciente, e não nas limitações do dispositivo.

- Maior conformabilidade
 - As fileiras individuais de stents permitem flexibilidade.
 - Fileiras de stents encaixadas (*nesting*) para maximizar a aposição e o selamento da parede.
- Reposicionamento exclusivo
 - Implantação inicial do tronco em ~ 70% do diâmetro.
 - Âncoras proximais reajustáveis para aprimorar o posicionamento.
- O único dispositivo com controle de angulação
 - Controle de angulação opcional em 2 etapas.
 - Ajuda a otimizar o selamento em pescoços altamente angulados.

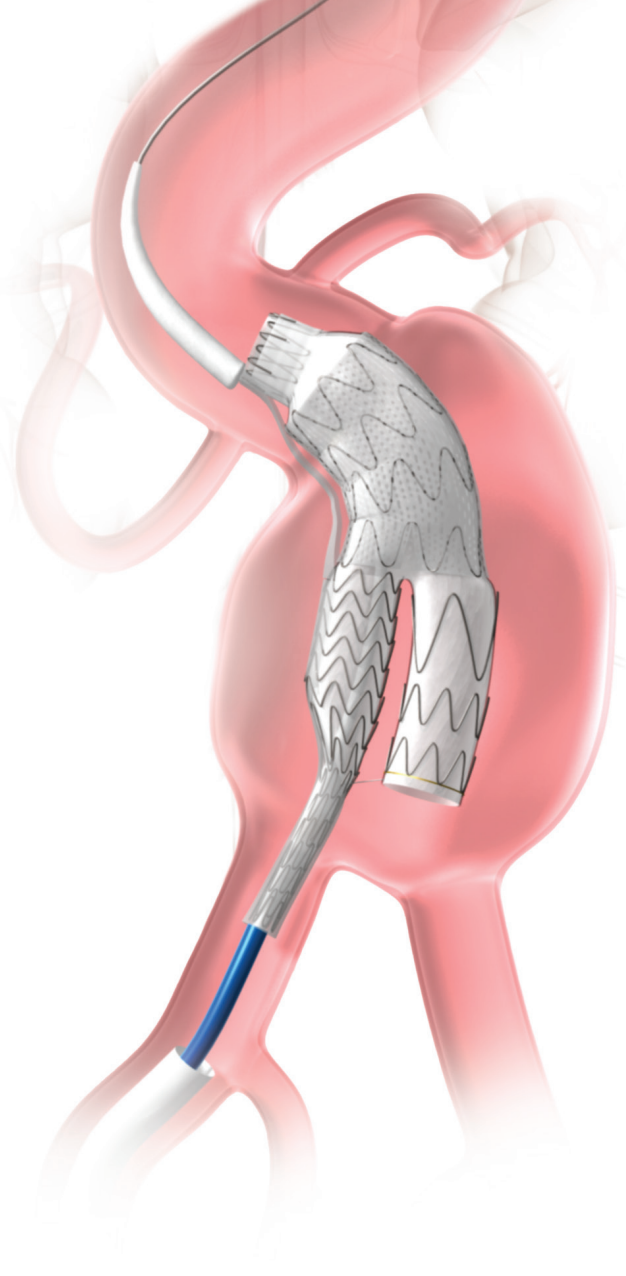

Referências

1. Avaliação da GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis no tratamento de aneurisma aórtico abdominal. Identificador NLM: NCT02489539. Publicado em 3 de julho de 2015. Atualizado em 13 de agosto de 2025. Acessado em 12 de setembro de 2025. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02489539>
2. Dados no arquivo.



Consulte as Instruções de Uso
em eifu.goremedical.com

Consulte as *Instruções de Uso* at eifu.goremedical.com no Web site eifu.goremedical.com para obter uma descrição completa de todas as indicações, advertências, precauções e contraindicações aplicáveis para os mercados onde este produto está disponível. Rx Only

Nome comercial: GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis. Número do registro na ANVISA: 80067930047.

Os produtos mencionados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

© 2026 W. L. Gore & Associates, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas registradas mencionadas são marcas comerciais de uma empresa do grupo de afiliadas da Gore ou de seus respectivos proprietários. A marca e os designs "Together, improving life" são marcas comerciais de uma empresa da Gore. 26AR1140-PT01 AGOSTO DE 2026 MAT-1357-1

W. L. Gore & Associates, Inc.
goremedical.com

Ásia-Pacífico +65 67332882 Austrália/Nova Zelândia 1800 680 424 Europa 00800 6334 4673
Estados Unidos Flagstaff, AZ 86004 800 437 8181 928 779 2771

