



Endoprótese constrita no tronco-ramo ipsilateral

1 Avance o dispositivo através da bainha introdutora até o local desejado e retire a bainha debaixo do dispositivo.

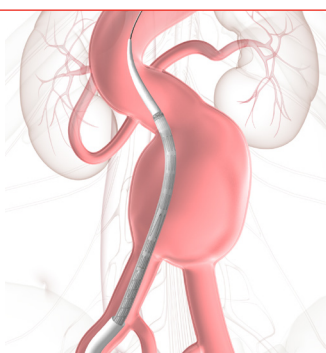


2 Passo 1 da liberação: Gire o botão externo branco de liberação no sentido anti-horário e puxe com um movimento constante.

Resultado: Liberação do tronco-ramo ipsilateral até o nível do portão contralateral. A fileira proximal tem um diâmetro total. O corpo do tronco tem ~70% do diâmetro total. O ramo ipsilateral está totalmente consti-

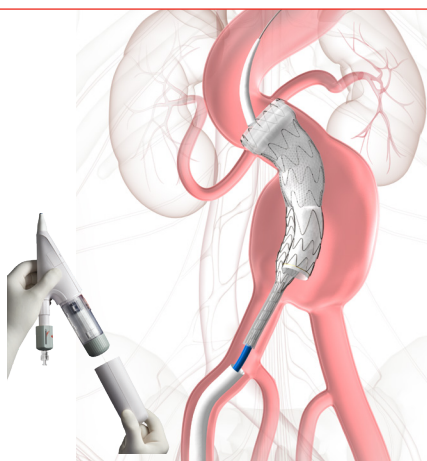


3 Canule o portão contralateral, avance a bainha introdutora no portão e, então, avance o ramo contralateral até o nível do marcador radiopaco longo. Retire a bainha debaixo do dispositivo e libere o ramo contralateral.

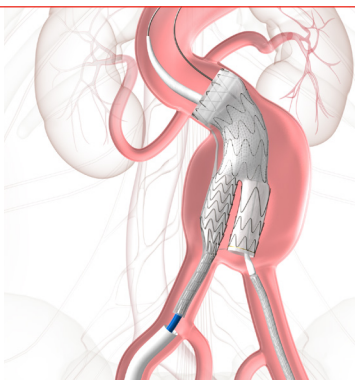

4 Passo de transição:
Puxe e segure a aba de segurança vermelha, gire o botão transparente no sentido anti-horário e puxe com um movimento constante.


Resultado:

- Remoção do laço de constrição, pino de travamento e linha de liberação da manga secundária
- O corpo do tronco é liberado em seu diâmetro total
- O portão contralateral é separado do tronco-ramo ipsilateral

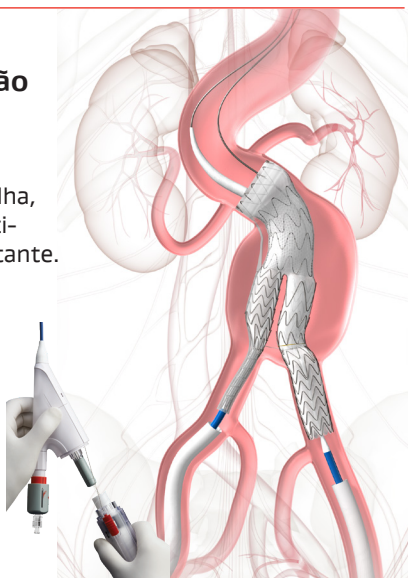

5 Passo 2 da liberação:
Gire o botão de liberação cinza no sentido anti-horário e puxe com um movimento constante.

Resultado:
Liberação do ramo ipsilateral.

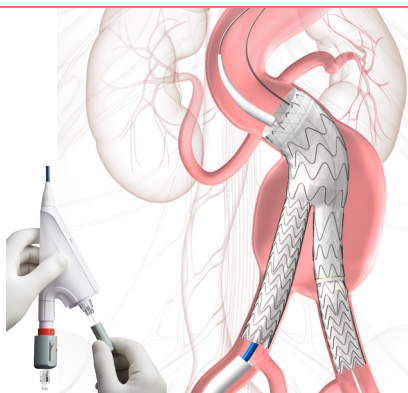

Controle da angulação antes do passo 1 da liberação do tronco e ramo ipsilateral

1a Gire o botão de controle de angulação cinza no sentido horário para avançar o fio de angulação.



2a **Somente para reposicionar**
Gire o botão cinza no sentido
horário para restringir a
extremidade proximal do
tronco.

Quando o dispositivo estiver na posição desejada, gire o botão de contração cinza no sentido horário para voltar a abrir.



Gire o botão cinza para restringir o segmento proximal do tronco. Gire o botão de controle de angulação cinza no sentido horário para avançar o fio de angulação.

Advertência: Não gire o tronco ou o cateter de entrega do extensor aórtico quando o fio de angulação tiver sido avançado. Podem ser causados danos ao dispositivo e/ou ao cateter.



Avance o extensor aórtico sobre um fio-guia 'super stiff' de 0,035" até o local desejado. Se for necessário angular o extensor aórtico, gire o botão de controle de angulação cinza no sentido horário.

Para liberar, gire o botão de liberação externo branco no sentido anti-horário e puxe em um movimento constante.

Se tiver sido usado o fio de angulação, gire o botão cinza de controle de angulação até que o indicador vermelho não seja mais visível e retire cuidadosamente o cateter de implantação.



Não:

- Gire o cateter de entrega do tronco além de 360° quando o dispositivo estiver totalmente constricto no cateter.
- Gire o cateter de implantação do tronco além de 90° quando parcialmente liberado.
- Retire a endoprótese não implantada pela bainha introdutora.
- Use o mecanismo de constrição/liberação mais de 2 vezes.
- Avance/puxe o fio de anquilação mais de 5 vezes em um procedimento.

(Consulte as advertências/precauções nas Instruções de uso).