

ゴア® エクスcluder®
コンフォーマブル AAAステントグラフト
アクティブコントロールシステム

GORE® EXCLUDER®
Conformable AAA Endoprosthesis
with ACTIVE CONTROL System


BECAUSE EVERY AORTA IS UNIQUE

ゴア® エクスcluder® デバイスファミリーに
新たなラインナップが加わり
アンギュレーションのコントロールが可能になりました



Together, improving life



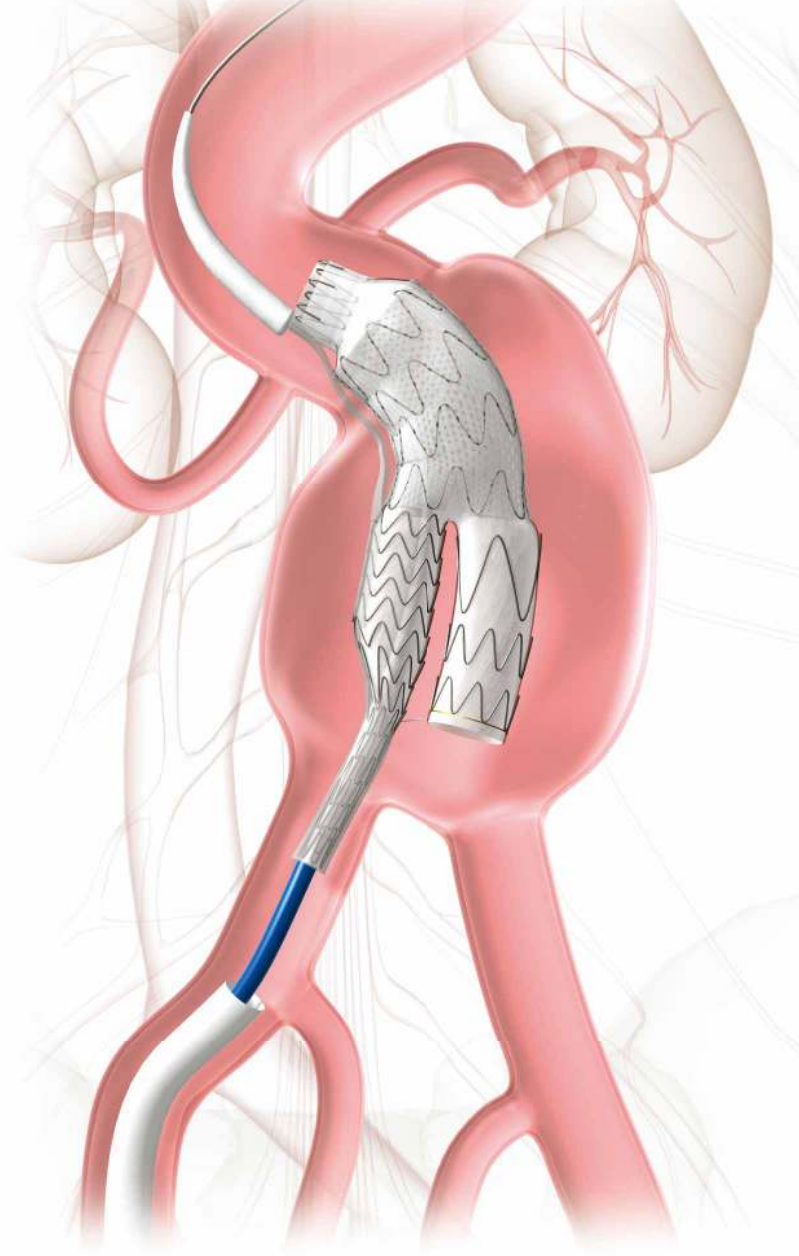

大動脈治療に 更なるソリューションを

ゴア® アクティブコントロールシステム：

コンフォーマブルなステントグラフト

- 解剖学的特徴にあわせて
大動脈壁への高いコンフォーマビリティを達成するデザイン
- 独立したステントデザイン

進化したデバイスポジショニング

- 中枢端を再拘束することで位置調整が可能
- パーシャルディプロイメントでは
トランクが規定径の約 70%で展開され
リポジショニングが容易に

オプションでのアンギュレーションコントロール

- 様々な血管走行に適した留置をサポートし
シーリングの最適化を図ります
- トランクは 2 段階で
アンギュレーションのコントロールが可能

ゴア® エクスクルーダー® コンフォーマブル AAA スtent グラフト アクティブコントロールシステム

コンフォーマビリティに優れたstent グラフトと進化したデリバリーシステムは、最適なシーリングを得られるようにデザインされています。

- 豊富な臨床実績により確立されたイノベーション
- 中枢ネック径16 - 18 mmにも適応を拡大

アンギュレーションコントロール機能を
備えた唯一のEVARデバイス



米国臨床試験成績

ショートネックサブスタディ 1年フォローアップ^{1,*}

Zero

Type I / Type III エンドリーク
マイグレーション
オープンコンバージョン
瘤破裂
ステントフラクチャー
脚閉塞

100%

技術的成功率

デバイスに関連する
重篤な有害事象の回避率

開存率

98.6%

動脈瘤径の拡大の回避率



¹ W. L. Gore & Associates. Assessment of the GORE® EXCLUDER® Conformable AAA Endoprosthesis in the Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms. NLM Identifier: NCT02489539. Published July 3, 2015. Updated January 5, 2022. Accessed March 3, 2022. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02489539>

* これらのデータポイントでは、造影CTを含むすべてのフォローアップ要件を満たした66名以上の患者が1年後の結果分析の対象となっています。データポイントによっては、66人を超える患者が含まれていますが、これについては添付文書で確認が可能です。

エクスクルーダー® コンフォーマブル AAAステントグラフトは
エクスクルーダー® デバイスファミリーの実証された性能に
基づいて開発されています。

エクスクルーダー® デバイスファミリーの実績



Most STUDIED*

EVAR device



400,000+

patients treated†



20+ years

of worldwide experience



ゴア® エクスクルーダー®
コンフォーマブル AAAステントグラフト
アクティブコントロールシステム



ゴア® エクスクルーダー®
C3デリバリーシステム



ゴア® エクスクルーダー®
IBE

* 現在利用可能なステントグラフトは、clinicaltrials.gov に掲載されている、現在入手可能なステントグラフトについての企業出資の臨床試験およびレジストリに基づく

† トランクイブシラテラル・レッグ出荷本数ベース

「添文ナビ」アプリで電子添文をご参照ください

販売名：エクスクルーダー®Y字型ステントグラフトシステム
承認番号：21900BZY00011000



メインボディ



レッグ等



IBE

販売名：ゴア®エクスクルーダー®コンフォーマブル AAAステントグラフトシステム
承認番号：30400BZX00077000



メインボディ



アオルタ・エクステンダー

ゴア、GORE、Together, improving life、アイビィー、エクスクルーダー、EXCLUDER、IBEおよび記載のデザイン(ロゴ)は、W. L. Gore & Associatesの商標です。
© 2022 W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社 22736031-JA OCTOBER 2022

製造元 W. L. Gore & Associates, Inc.

製造販売元 **日本ゴア合同会社**
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル
T 03 6746 2560 F 03 6746 2561 gore.co.jp

