

ES HORA DE REPLANTEAR LOS TIPS



Las endoprótesis GORE® VIATORR® TIPS con expansión controlada combinan la tradicional permeabilidad demostrada¹ con el control del diámetro

- **Control del diámetro** — Diseñado para lograr el gradiente de presión portal deseado
- **Control duradero del diámetro*** — Determine y ajuste el diámetro que desea mantener
- **Diseñado para la flexibilidad** — Adaptabilidad a la anatomía tortuosa
- **Un único dispositivo** — Ajuste a un diámetro de 8 / 9 / 10 mm durante la implantación

* Según datos de laboratorio en archivo. Aumento del diámetro (expansión del diámetro) inferior a 0,25 mm, demostrado en un periodo simulado de 10 años a presiones portales fisiológicas.

1. Basado en la endoprótesis GORE® VIATORR® TIPS: Bureau C, Pagan JCG, Layrargues GP, et al. Patency of stents covered with polytetrafluoroethylene in patients treated by transjugular intrahepatic portosystemic shunts: long term results of a randomized multicentre study. *Liver International* 2007;27(6):742-747.

Together, improving life




Especificaciones del dispositivo

Número de catálogo	Diámetro interno de la endoprótesis (mm)*	Longitud cubierta por el injerto (cm)	Longitud no cubierta (cm)	Diámetro máximo de la guía (pulg.)	Vaina introductora hemostática (Fr)	Diámetro máximo del balón de dilatación (mm)*
PTB8104275H	8-10	4	2	≤0,035	10	10
PTB8105275H	8-10	5	2	≤0,035	10	10
PTB8106275H	8-10	6	2	≤0,035	10	10
PTB8107275H	8-10	7	2	≤0,035	10	10
PTB8108275H	8-10	8	2	≤0,035	10	10

* El diámetro del balón seleccionado puede ser de 8, 9 o 10 mm, y no debe exceder de 10 mm. Se debe seleccionar un balón que pueda alcanzar una presión de hinchado de 10 ATM, y se debe hinchar a un mínimo de 10 ATM.

Expansión controlada

	Característica	Ventaja
1	Revestimiento de la endoprótesis de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE)	Permeabilidad mantenida debido a la reducida estenosis intrastent
2	Estructura de nitinol	Autoexpandible, fuerza radial y flexibilidad
3	Región portal no cubierta	Para perfusión portal y de la derivación
4	Marcadores de oro radiopacos	Visualización sencilla
5	Funda de expansión controlada	Determine y ajuste el diámetro durante la implantación

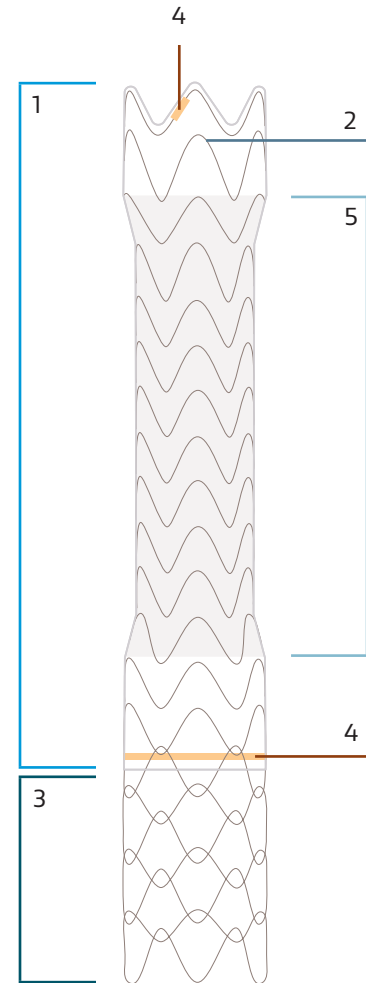

Es hora de replantear los TIPS.

Más información en [goremedical.com/rethinkTIPS](https://www.goremedical.com/rethinkTIPS)

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su representante técnico de ventas de Gore.

Consult Instructions
for Use
[elfu.goremedical.com](https://www.goremedical.com)

Consulte las *Instrucciones de uso* para obtener una descripción detallada de todas las advertencias, precauciones y contraindicaciones. Rx Only

Los productos mencionados pueden no estar disponibles en todos los mercados.

GORE, *Together, improving life*, VIATORR y sus diseños son marcas comerciales de W. L. Gore & Associates, Inc.

© 2021 W. L. Gore & Associates, Inc. NOVIEMBRE DE 2021

W. L. Gore & Associates, Inc.
Flagstaff, AZ 86004
Asia Pacific +65 67332882 Europe 00800 6334 4673
United States 800 437 8181 928 779 2771 [goremedical.com](https://www.goremedical.com)



2T144858-ES